

Ortesis de prueba NEURO SWING FIT AFO



La ortesis de prueba NEURO SWING FIT AFO con articulación de tobillo de sistema NEURO SWING Carbon premontada es una ortesis preproducida de material de fibra de carbono.

Se utiliza como ortesis de prueba antes de un tratamiento con una AFO a medida en la que se monta una articulación de tobillo de sistema con topes dinámicos (p. ej., NEURO SWING).

La ortesis de prueba NEURO SWING FIT AFO:


- se entrega como set para una pierna derecha e izquierda.
- dispone de una articulación de tobillo de sistema NEURO SWING Carbon premontada.
- se suministra con una almohadilla precortada para la valva tibial, con puntos de gancho autoadhesivos, y una bolsa de tela por cada ortesis.
- tiene un cierre de gancho y bucle premontado en la zona de la pantorrilla que permite una sujeción segura.

Unidades de muelle (véase al dorso) se deben pedir por separado.


Número del calzado*	Tamaño de ortesis	Referencia para anchura de sistema			
		12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
29-31	XXS	AC5201-XXS/LR	AC5202-XXS/LR	-	-
32-34	XS	-	AC5202-XS/LR	-	-
35-37	S	-	-	AC5203-S/LR	-
38-40	M	-	-	AC5203-M/LR	-
41-43	L	-	-	-	AC5205-L/LR
44-46	XL	-	-	-	AC5205-XL/LR

* Determine el número del calzado y seleccione el tamaño de ortesis correspondiente. En pacientes con peso corporal elevado o estatura fuerte puede ser necesario seleccionar el tamaño de ortesis más grande.

⚠ La ortesis de prueba NEURO SWING FIT AFO solo debe llevarse con una media calcetín o con una media de compresión hasta las rodillas.

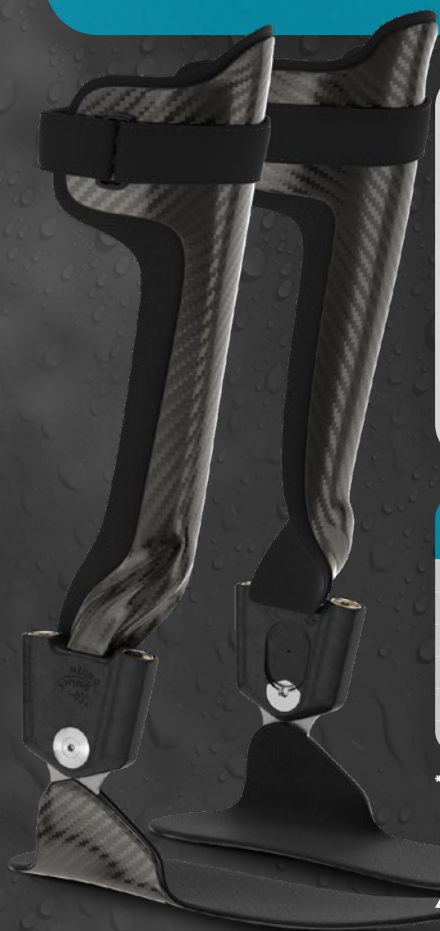


Unidades de muelle en maletín

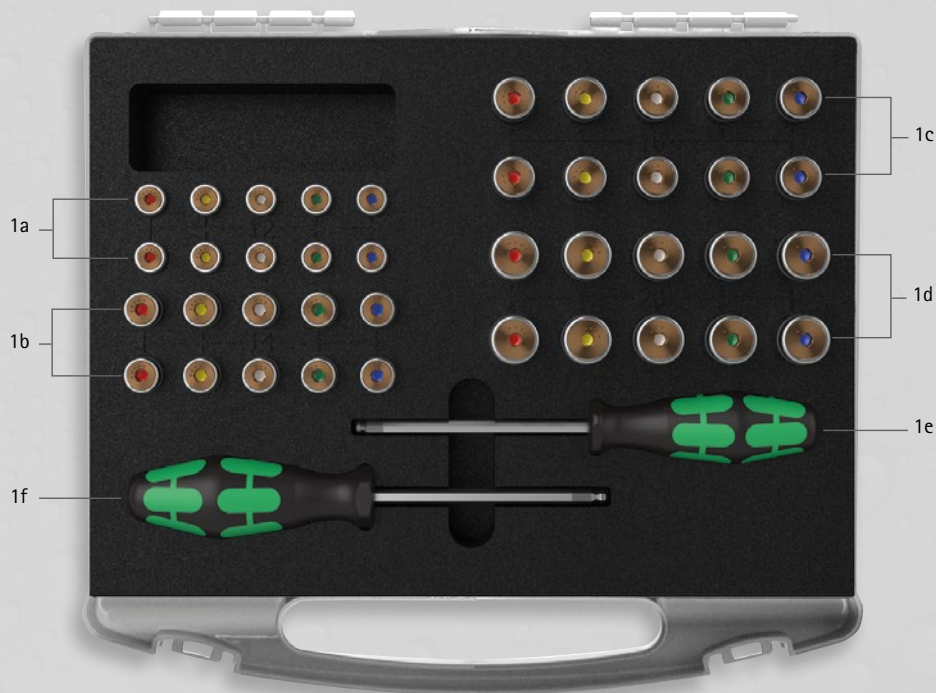

Unidades de muelle en maletín

Pos.	Denominación	Referencia
1	1 x set de unidades de muelle en maletín con herramientas	SF5800-C
sin fig.	1 x maletín para unidades de muelle para llenar, con herramientas (sin unidades de muelle)	SF5800-C/0
1a	2 x unidades de muelle de cada color en azul, verde, blanco, amarillo y rojo para NEURO SWING Carbon 12 mm	véase la tabla de unidades de muelle
1b	2 x unidades de muelle de cada color en azul, verde, blanco, amarillo y rojo para NEURO SWING Carbon 14 mm	véase la tabla de unidades de muelle
1c	2 x unidades de muelle de cada color en azul, verde, blanco, amarillo y rojo para NEURO SWING Carbon 16 mm	véase la tabla de unidades de muelle
1d	2 x unidades de muelle de cada color en azul, verde, blanco, amarillo y rojo para NEURO SWING Carbon 20 mm	véase la tabla de unidades de muelle
1e	1 x destornillador con cabeza de bola hexagonal, 4 x 100 mm	WZ5112-4010
1f	1 x destornillador con cabeza de bola hexagonal, 5 x 100 mm	WZ5112-5010

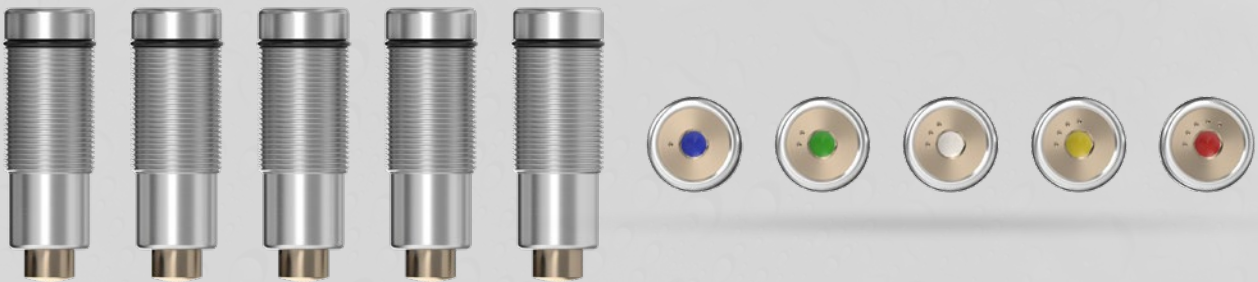

Unidades de muelle (para una articulación de tobillo de sistema NEURO SWING Carbon necesita dos de las siguientes unidades de muelle):

Unidad	Denominación	Referencia para anchura de sistema			
		12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Pieza	unidad de muelle, azul, normal, rango de movimiento máximo de 15°	SF5801-C/15/03	SF5802-C/15/05	SF5803-C/15/07	SF5805-C/15/18
Pieza	unidad de muelle, verde, media, rango de movimiento máximo de 15°	SF5801-C/15/06	SF5802-C/15/11	SF5803-C/15/15	SF5805-C/15/25
Pieza	unidad de muelle, blanca, fuerte, rango de movimiento máximo de 10°	SF5801-C/10/12	SF5802-C/09/16	SF5803-C/10/21	SF5805-C/10/40
Pieza	unidad de muelle, amarilla, bien fuerte, rango de movimiento máximo de 10°	SF5801-C/10/19	SF5802-C/10/29	SF5803-C/10/31	SF5805-C/10/60
Pieza	unidad de muelle, roja, extra fuerte, rango de movimiento máximo de 5°	SF5801-C/05/33	SF5802-C/05/53	SF5803-C/05/63	SF5805-C/05/99