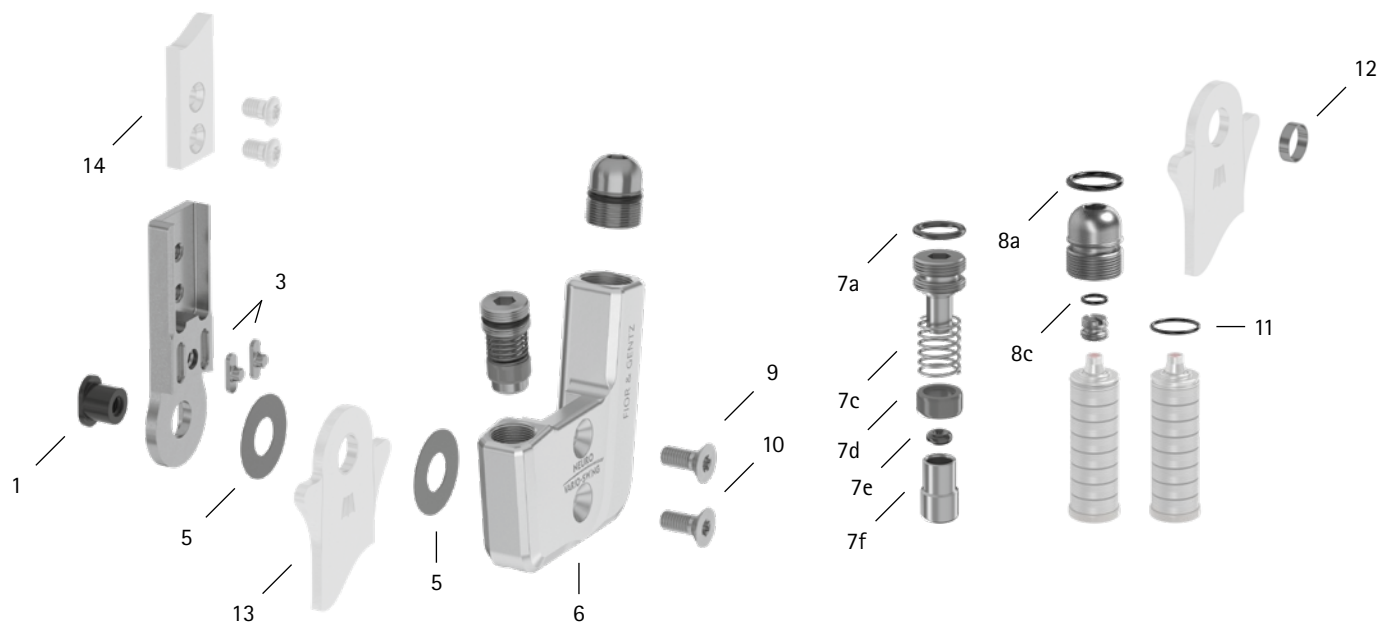




Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0630	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0392-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS2009-045					
5	GS2009-050					
5	GS2009-055					
5	GS2009-060					
6	SH0462-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SH0462-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
7a	VE3771-08/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7c	FE1916-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7d	GS1007-350	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7e	VE3771-010/20	O-Ring-Dämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7f	SH0492-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8a	VE3771-09/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8c	VE3771-04/10	O-Ring zur Sicherung der Bewegungslimitierungsschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
10	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
6-10	SH4972-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6-10	SH4972-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Federeinheiten						
11	VE3771-07/10	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
-	SF5802-15/05	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
-	SF5802-15/11	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verrutschen der Tellerfedern	Tellerfedern mit Zange neu ausrichten		
-	SF5802-09/16	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit		Geräusche der Federeinheit		
-	SF5802-10/29	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
-	SF5802-05/53	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
12	BR1009-L025	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
13	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar