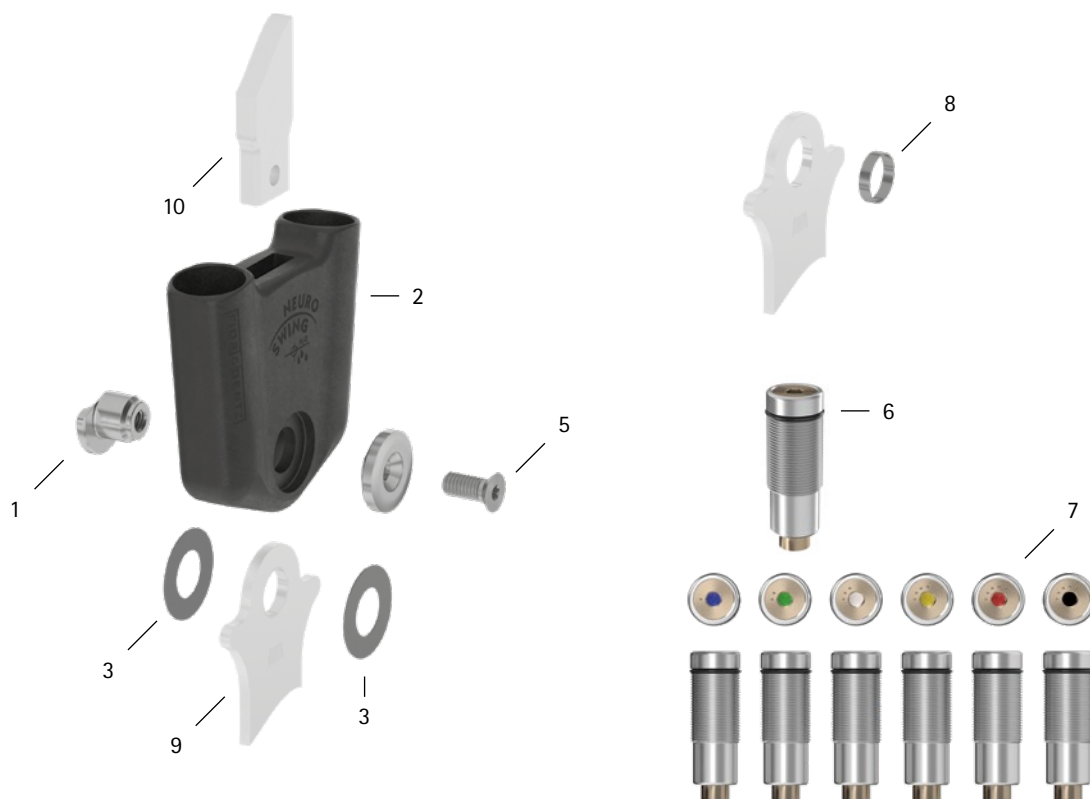




Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SF0593-C/1	Splintbolzen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SF0503-C	Gelenkgehäuse	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
3	GS2413-040	Gleitscheibe, Ø = 24 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2413-045					
3	GS2413-050					
3	GS2413-055					
3	GS2413-060					
5	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Federeinheiten und statischer Dorsalanschlag						
6	VE3771-12/12	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit und des statischen Dorsalanschlags	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF5803-C/15/07	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß Geräusche der Federeinheit/des statischen Dorsalanschlags	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF5803-C/15/15	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit				
7	SF5803-C/10/21	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
7	SF5803-C/10/31	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
7	SF5803-C/05/63	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
7	SF5803-C/0	statischer Dorsalanschlag, schwarz, 0° Bewegungsfreiheit				
Systemfußbügel, Systemmanker und Systemschienen						
8	BR1312-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
10	siehe Katalog	Systemmanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
-	-	Klebeverbindung (Systemschiene/Systemmanker und Systemgelenk)	Bruch	neues Systembauteil aus Carbon einkleben	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten