


Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

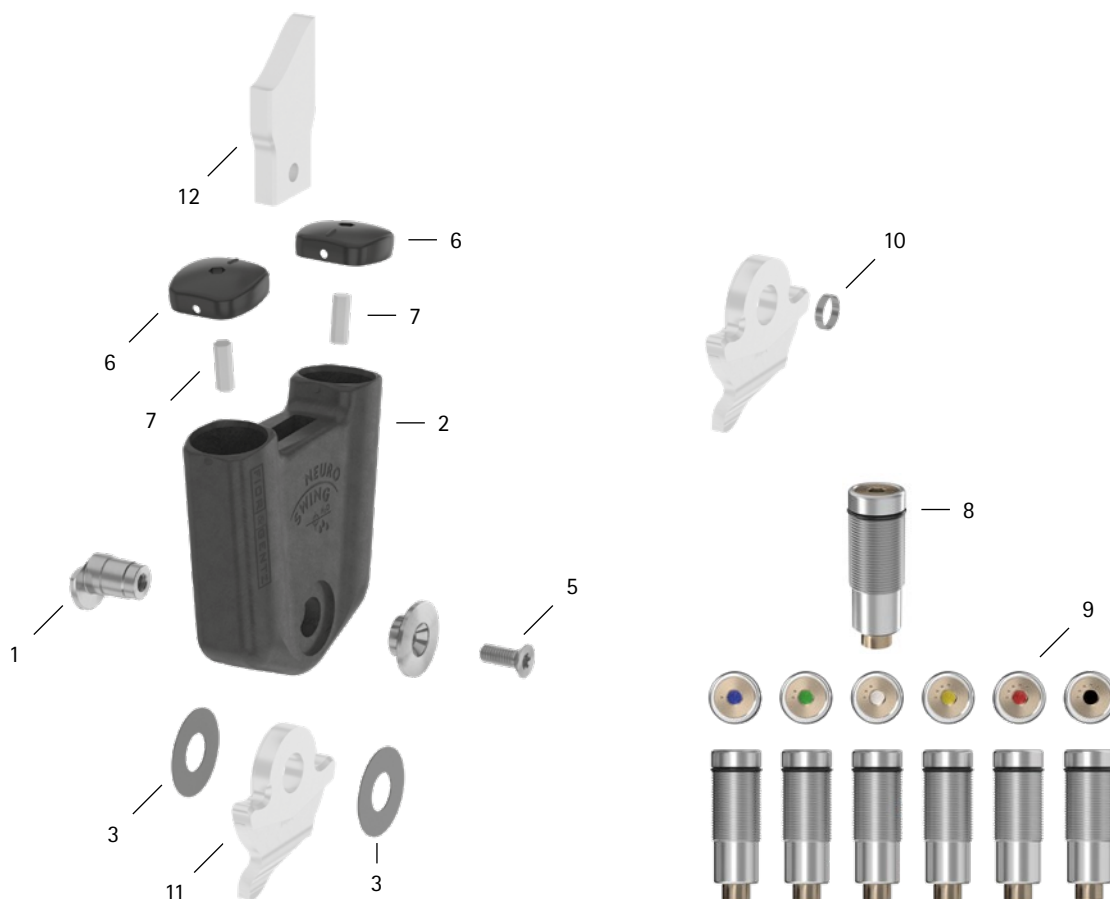

Pos.	24 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SF0597-C/1	Splintbolzen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SF0507-C	Gelenkgehäuse	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
3	GS3013-040	Gleitscheibe, Ø = 30 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS3013-045					
3	GS3013-050					
3	GS3013-055					
3	GS3013-060					
5	SC1416-L16	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SF0597-C/4/1	Federeinheitenabdeckung	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
7	SF0597-C/4/0	Sechskantstift	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
Federeinheiten und statischer Dorsalanschlag						
8	VE3771-180/15	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit und des statischen Dorsalanschlags	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SF5807-C/15/12	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß Geräusche der Federeinheit/des statischen Dorsalanschlags	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SF5807-C/15/25	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit				
9	SF5807-C/10/53	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
9	SF5807-C/10/80	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
9	SF5807-C/05/99	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
9	SF5807-C/0	statischer Dorsalanschlag, schwarz, 0° Bewegungsfreiheit				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
10	BR1413-L070	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
12	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
-	-	Klebeverbindung (Systemschiene/Systemanker und Systemgelenk)	Bruch	neues Systembauteil aus Carbon einkleben	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

WP0130-DE-2026-09