


Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

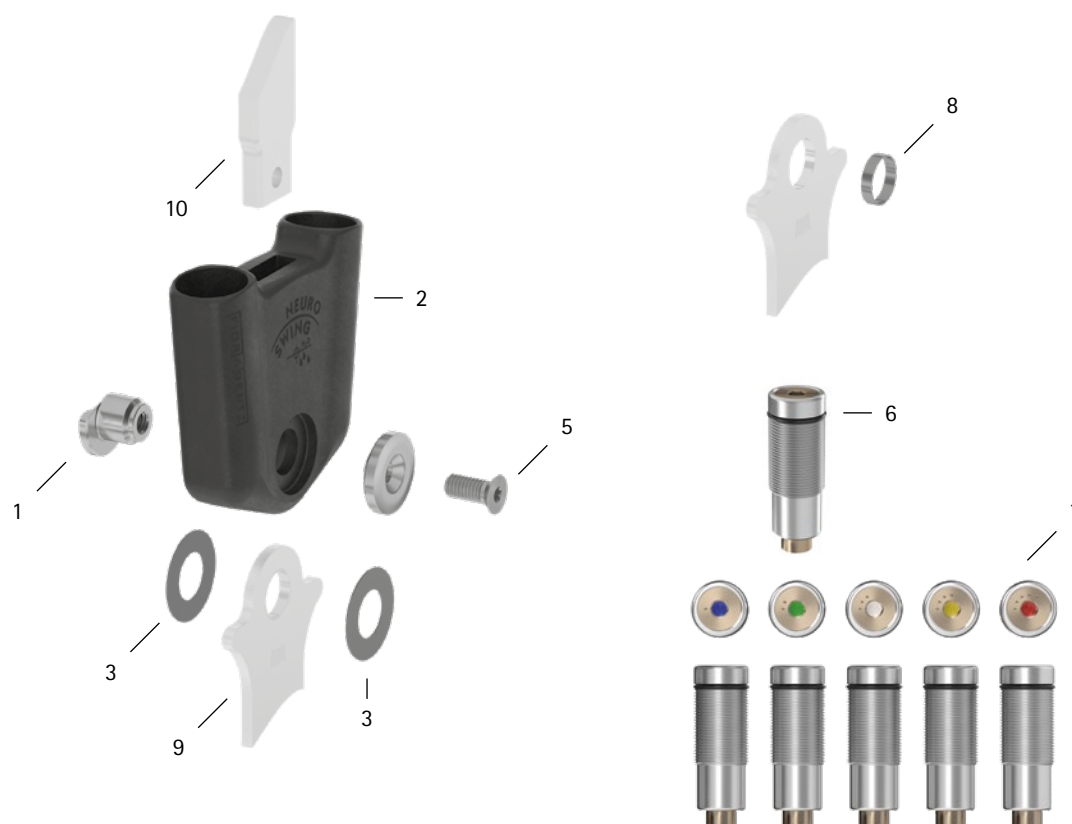

Pos.	10 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SF0590-C/1	Splintbolzen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SF0500-C	Gelenkgehäuse	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
3	GS1207-040	Gleitscheibe, Ø = 12 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1207-045					
3	GS1207-050					
3	GS1207-055					
3	GS1207-060					
5	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Federeinheiten						
6	VE3771-070/12	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF5800-C/15/02	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF5800-C/15/04	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit				
7	SF5800-C/10/06	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit	Geräusche der Federeinheit			
7	SF5800-C/10/09	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
7	SF5800-C/05/17	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
8	BR0807-L020	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
-	-	Klebeverbindung (Systemschiene/Systemanker und Systemgelenk)	Bruch	neues Systembauteil aus Carbon einkleben	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

WP0132-DE-2026-05