



CITYDRIVE


Orthesenschuh. Anders.



CITYDRIVE

Elegant zu jedem Anlass.

Der CITYDRIVE Orthesenschuh ist nicht nur neu, sondern anders. Er ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, die wir beim Bau von maßgefertigten Orthesen gesammelt haben. Dabei standen vor allem die Anforderungen und Ansprüche von Orthesenträgern an einen eleganten Orthesenschuh im Vordergrund.

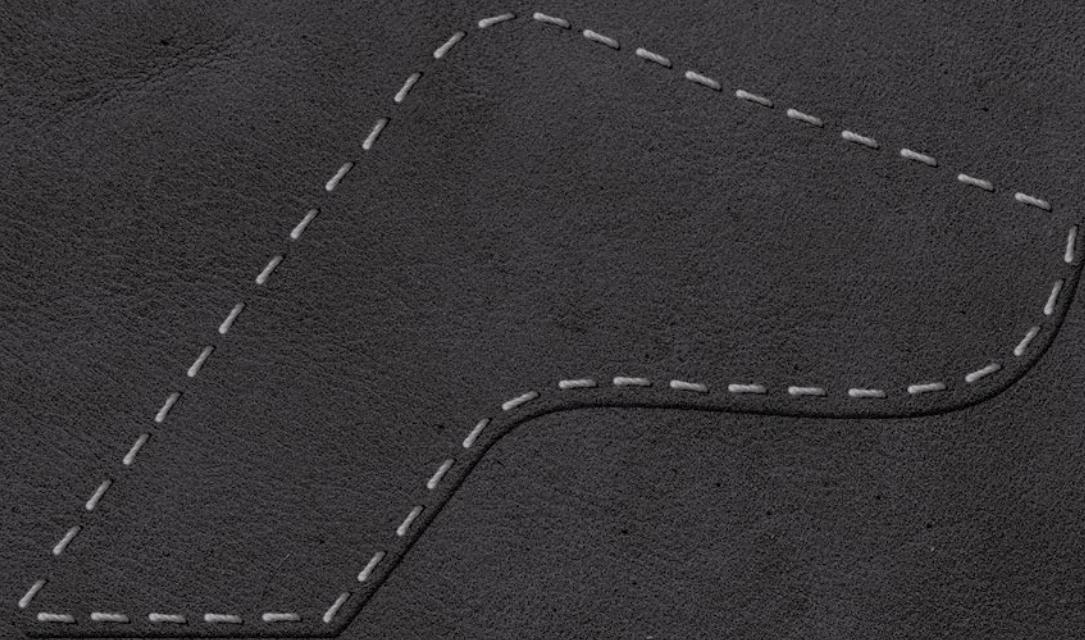

Ein unisex Schuh, der sich nicht nur durch außergewöhnliche Konstruktionsmerkmale von herkömmlichen Orthesenschuhen unterscheidet, sondern gleichermaßen durch seinen mondänen Stil. Elegant zu jedem Anlass mit CITYDRIVE – das Original mit dem Bumerang.



CITYDRIVE

Handarbeit, die in allen Details überzeugt.

Einstiegsschleife

Die Einstiegsschleife erleichtert das An- und Ausziehen.

Was ist anders?

Das integrierte elastische Textilmaterial bietet komfortablen Platz für Orthesen mit Knöchelgelenk und verhindert gleichzeitig eine Schaftverformung des Schuhs.

Hochwertiges Leder

Edles Nubukleder als Obermaterial und weiches Kalbsleder als Innenfutter sorgen für höchsten Tragekomfort.

Leichte Laufsohle

Die Laufsohle aus Polyurethan (PU) ist besonders leicht und gleichzeitig sehr robust. Sie verfügt außerdem über ein rutschfestes Profil.

2 Innensohlen


Die zwei Innensohlen à 5 mm sind herausnehmbar und dienen dem Volumenausgleich.



Sicherer Halt

Der erhöhte, anatomisch geformte Schafttrand und die eingebettete Fersenkappe garantieren einen sicheren Halt.



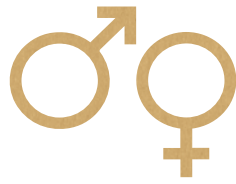

Informationen für die Bestellung

HMV-Nummer: 31.03.03.7056

| Art.-Nr. | Innensohlenlänge |
|-----------|------------------|
| OS4110-36 | 235 mm |
| OS4110-37 | 244 mm |
| OS4110-38 | 249 mm |
| OS4110-39 | 255 mm |
| OS4110-40 | 262 mm |
| OS4110-41 | 270 mm |
| OS4110-42 | 277 mm |

| Art.-Nr. | Innensohlenlänge |
|-----------|------------------|
| OS4110-43 | 281 mm |
| OS4110-44 | 289 mm |
| OS4110-45 | 295 mm |
| OS4110-46 | 300 mm |
| OS4110-47 | 307 mm |
| OS4110-48 | 314 mm |

| Schuhmaße | | Verwendung |
|--------------|-------|-----------------------|
| Sprengung* | 10 mm | h-Cast |
| Absatzhöhe** | 25 mm | Orthesen-Konfigurator |

* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Platte bei der Befundung.

** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der Berechnungsgrundlage eingetragen.

Verkauf nur paarweise.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädiotechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Deutschland)

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM