



PARKSTREET

Orthoseschuh. Anders.






PARKSTREET

Style und Funktion für den Alltag.

Der PARKSTREET Orthesenschuh ist nicht nur neu, sondern anders. Er ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, die wir beim Bau von maßgefertigten Orthesen gesammelt haben. Dabei standen vor allem die Anforderungen und Ansprüche von Orthesenträgern an einen Orthesenschuh im Vordergrund.

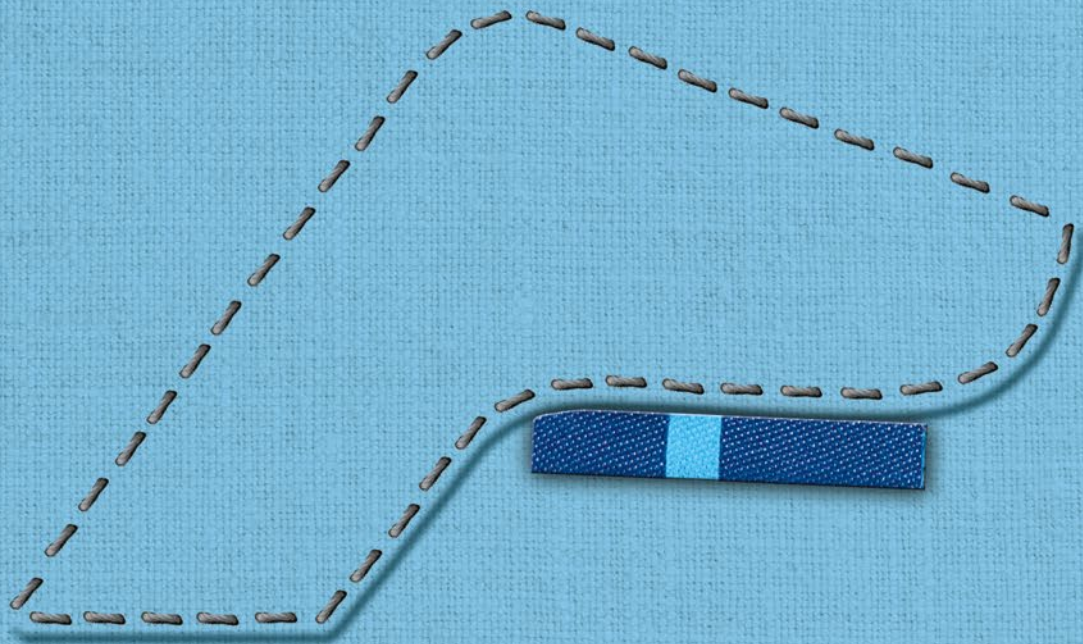

Ein unisex Schuh, der sich nicht nur durch außergewöhnliche Konstruktionsmerkmale von herkömmlichen Orthesenschuhen unterscheidet, sondern gleichermaßen durch seinen modernen Style. Casual durch den Alltag mit PARKSTREET – das Original mit dem Bumerang.

PARKSTREET. Handarbeit, die in allen Details überzeugt.



Was ist anders?


Das integrierte elastische Textilmaterial bietet komfortablen Platz für Orthesen mit Knöchelgelenk und verhindert gleichzeitig eine Schaftverformung des Schuhs.

Sicherer Halt

Der erhöhte, anatomisch geformte Schafttrand und die eingebettete Fersenkappe garantieren einen sicheren Halt.


Einstiegsschleife

Die Einstiegsschleife erleichtert das An- und Ausziehen.

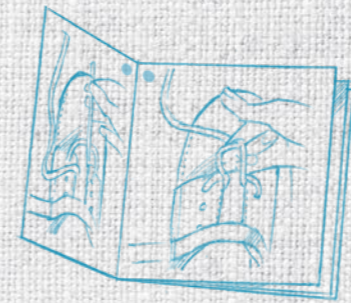

Einhand-Schnüranleitung

Eine Einhand-Schnüranleitung, die jedem Paar Schuhe zusammen mit einem zusätzlichen Schnürsenkel für die Einhand-Schnürung beiliegt, bietet Patienten mit halbseitiger Lähmung Unterstützung beim Schnüren der Schuhe.

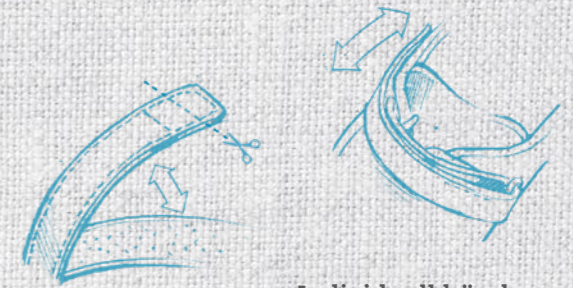

Individuell kürzbar und weite Öffnungsmöglichkeit

Dank des elastischen Textilmaterials und der Kombination aus kürzbarem Klettverschluss und Schnürsenkeln lässt sich die Schuhöffnung für einen bequemen Einstieg vergrößern.

Robuster Stoff

Der robuste Stoff aus dicht gewebter Baumwolle ist unempfindlich, leicht zu reinigen und garantiert eine sorgenfreie Verwendung im Alltag. Bei Bedarf können die Schuhe in der Waschmaschine 30 Minuten bei 30 °C gewaschen werden.



2 Innensohlen

Die zwei Innensohlen à 5 mm sind herausnehmbar und dienen dem Volumenausgleich.

Multifunktionelle Laufsohle

Die absatzlose Laufsohle aus Gummi isoliert Kälte und Nässe und verfügt über ein rutschfestes, stoßdämpfendes Profil.





Informationen für die Bestellung

HMV-Nummer: 31.03.03.7052

Art.-Nr.	Innensohlenlänge
OS4941-32	209 mm
OS4941-33	216 mm
OS4941-34	223 mm
OS4941-35	229 mm
OS4941-36	235 mm

Art.-Nr.	Innensohlenlänge
OS4941-37	242 mm
OS4941-38	249 mm
OS4941-39	254 mm
OS4941-40	261 mm
OS4941-41	268 mm
OS4941-42	275 mm

Art.-Nr.	Innensohlenlänge
OS4941-43	281 mm
OS4941-44	287 mm
OS4941-45	294 mm
OS4941-46	301 mm
OS4941-47	307 mm
OS4941-48	314 mm

Schuhmaße	Verwendung
Sprengung*	0 mm h-Cast
Absatzhöhe**	14 mm Orthesen-Konfigurator

* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Platte bei der Befundung.

** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der Berechnungsgrundlage eingetragen.

Verkauf nur paarweise

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Deutschland)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM