


NEU

Systemknie- und knöchelgelenke mit plug+go MODULARITÄT

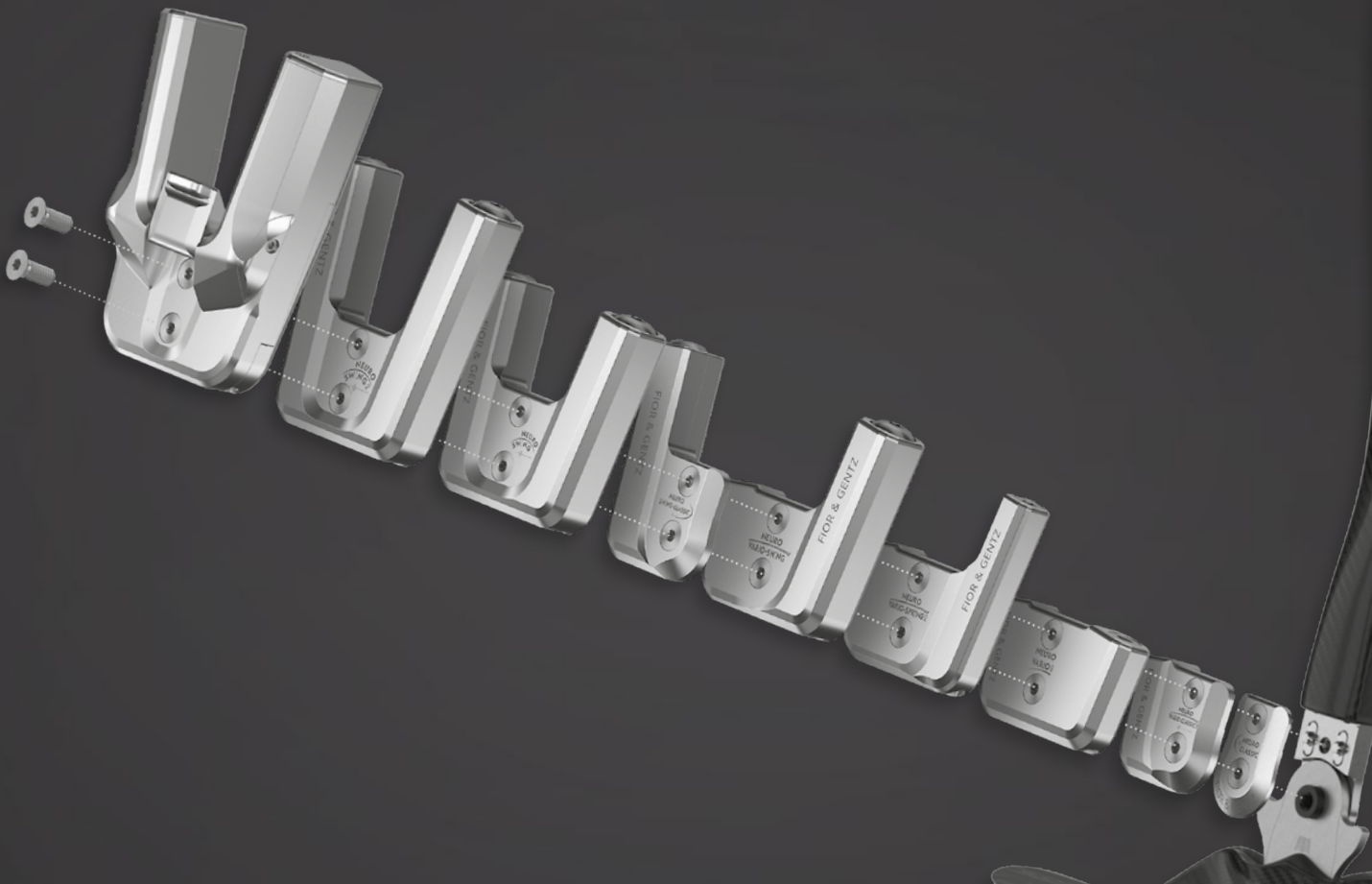

Systemkniegelenke mit

NEU im Produktsortiment

plug+go
MODULARITÄT

NEU

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

jetzt auch auf **KNIEEBENE**

flexibel versorgen



NEU zum Produktsortiment hinzugekommen sind zwei frei bewegliche Systemkniegelenke mit plug + go Modularität, das NEURO VARIO 2 und das NEURO VARIO-SWING.

Beide Systemgelenke bieten eine stufenlose Einstellbarkeit und somit Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Patienten.

Die Umrüstung von einem Systemgelenk mit plug + go Modularität auf ein anderes erfolgt mit nur wenigen

Handgriffen durch den Austausch der Funktionseinheiten.

Durch eine Kombination mit den Systemknöchelgelenken mit plug + go Modularität lässt sich somit eine KAFO bauen, die auf beiden Gelenkebenen größtmögliche Flexibilität bei der Versorgung bietet.

NEURO VARIO 2

die ideale Versorgungsoption für Patienten, die ihr gesamtes Bewegungspotenzial im Kniegelenk nutzen möchten, aber einen statischen Extensionsanschlag benötigen

stufenlos einstellbarer Extensionsanschlag (0°-20°)

statischer Extensionsanschlag

umrüstbar auf NEURO VARIO-SWING

statischer Extensionsanschlag, einstellbar

monozentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung

NEURO VARIO-SWING

die ideale Versorgungsoption für Patienten, die ihr gesamtes Bewegungspotenzial im Kniegelenk nutzen möchten, aber einen dynamischen Extensionsanschlag benötigen

austauschbare Federeinheiten

Anschlagdämpfer

umrüstbar auf NEURO VARIO 2

dynamischer Extensionsanschlag, einstellbar

monozentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung

Systemknöchelgelenke mit

plug+go
MODULARITÄT

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



...DIE FUNKTION FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

EINFACH UND SCHNELL IN DER MONTAGE
FLEXIBEL IM EINSATZ



Unser Produktsortiment an Systemknöchelgelenken mit plug + go Modularität ist aufgrund der vielen Vorteile und der hohen Nachfrage in den letzten Jahren stetig gewachsen. Somit stehen mittlerweile neun verschiedene Systemknöchelgelenke mit unterschiedlichen Funktionen für die verschiedensten Ansprüche zur Verfügung.

Die Umrüstung von einem Systemgelenk mit plug + go Modularität auf ein anderes erfolgt mit nur wenigen Handgriffen durch den Austausch der Funktionseinheiten.

Für alle Systemgelenke mit plug + go Modularität werden dieselben Gelenkoberteile und dieselben Systemfußbügel verwendet. Andere Systemgelenke können durch Einfeilen des Systemfußbügels nachträglich ebenfalls modular genutzt werden. Dadurch ist eine individuelle und anpassbare Patientenversorgung möglich, die ohne eine komplette Neuanfertigung der Orthese auskommt. So kann bei Bedarf zeitnah und unkompliziert auf geänderte Bedürfnisse des Patienten reagiert werden.

Systemknöchelgelenke mit




NEURO CLASSIC

der flexible Mittläufer zu den anderen Systemknöchelgelenken mit plug + go Modularität



NEURO VARIO-CLASSIC 2

das einfache Systemknöchelgelenk mit statischem Dorsalanschlag

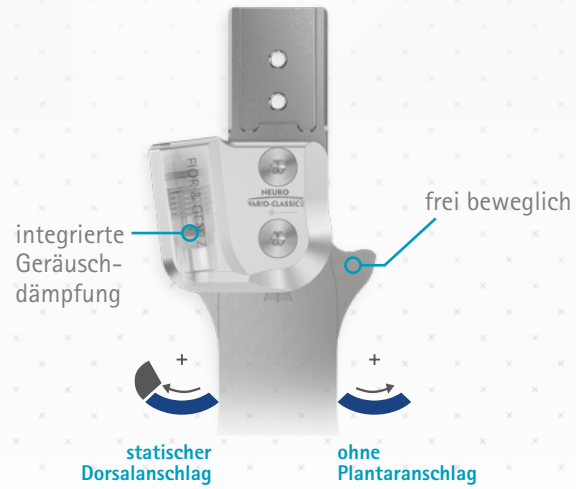


NEURO VARIO 2

die ideale Versorgungsoption für Patienten mit starker Bewegungseinschränkung im OSG



NEURO VARIO-SPRING 2

für Patienten mit Fußheberschwäche und starker Bewegungseinschränkung in Dorsalextension

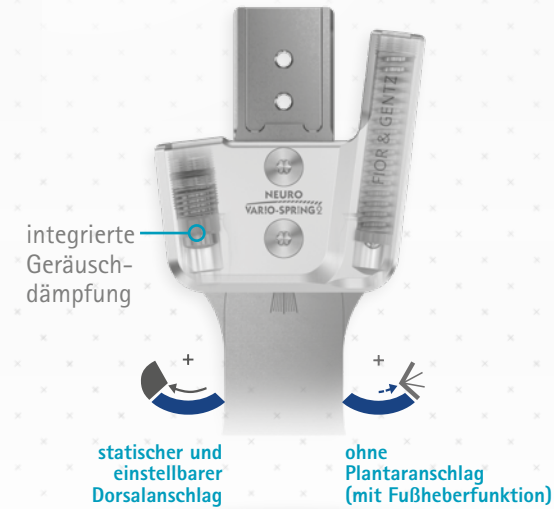

NEURO VARIO-SWING

die ideale Versorgungsoption für Patienten mit starker Bewegungseinschränkung in Dorsalextension und Bewegungspotenzial in Plantarflexion




NEURO SWING-CLASSIC

das einfache Systemknöchelgelenk mit dynamischem Dorsalanschlag




NEURO SWING

die ideale Versorgungsoption für Patienten, die ihr Bewegungspotenzial im gesamten OSG nutzen möchten

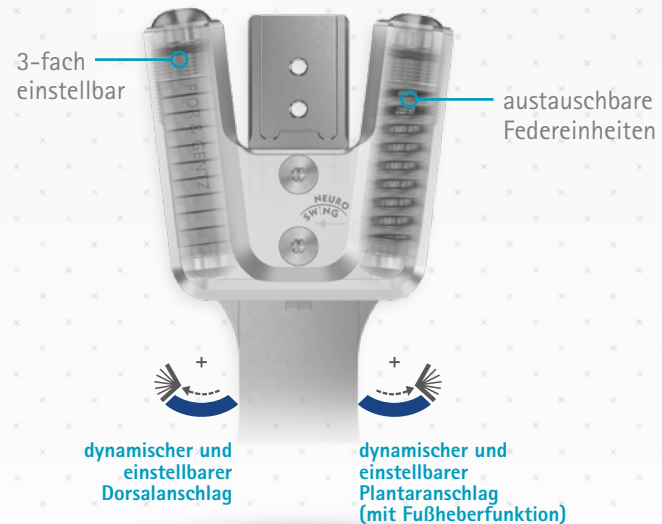

NEURO SWING 2

die ideale Versorgungsoption für Patienten, die ihr Bewegungspotenzial im gesamten OSG nutzen möchten

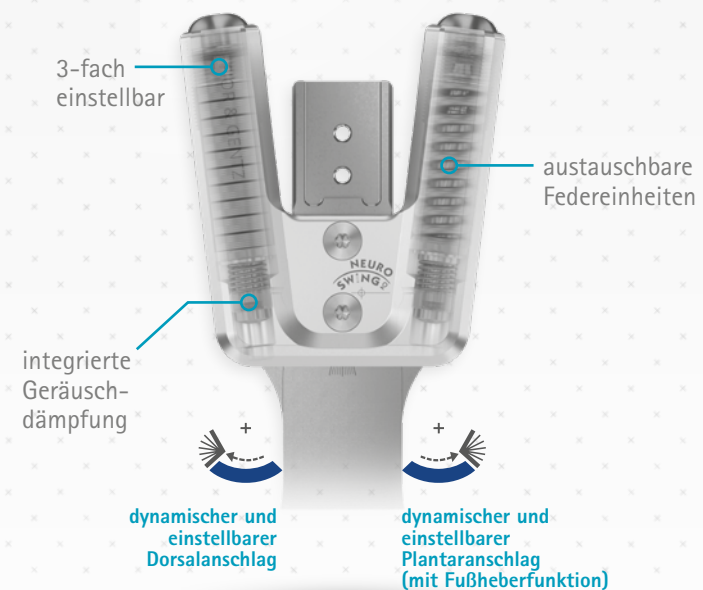

NEURO HiSWING

die ideale Versorgungsoption für aktive Patienten, die ihre Orthese selbst an ihre Umgebungssituation anpassen wollen



plug+go

MODULARITÄT



Orthesen- Konfigurator

www.orthesen-konfigurator.de

Sie möchten für Ihre Patientin oder Ihren Patienten eine Orthese mit **plug+go** Modularität anfertigen?

Nutzen Sie den Orthesen-Konfigurator, um selbstständig die Systembauteile für eine Orthese mit **plug+go** Modularität zusammenzustellen. Der Orthesen-Konfigurator ermittelt mithilfe der Patientendaten und unter Berücksichtigung der Belastbarkeit die passenden Systembauteile.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Deutschland)

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM