


## NEURO CLASSIC-SPRING

# Systemknöchelgelenk mit Umrüstooption auf plug + go Modularität

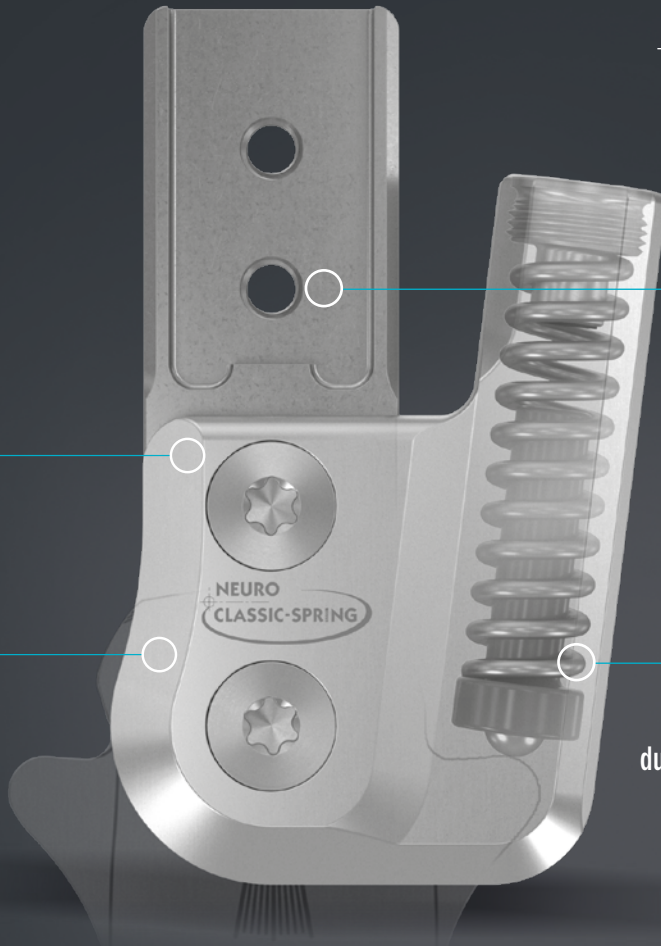

erhältlich in Stahl und Titan

umrüstbar auf ein Systemgelenk  
 mit plug + go Modularität  
 durch Austauschen der  
 Funktionseinheit und Einfeilen  
 des Systemfußbügels

verbesserte Einbindung  
 ins Laminat dank  
 schrägem Federkanal

besonders lange Lebensdauer  
 durch neu konstruierte Druckfedern



gerade



oben nach innen gekröpft



oben nach außen gekröpft



10 mm



12 mm



14 mm



16 mm



20 mm

## NEURO VARIO-SPRING 2

# Systemknöchelgelenk mit plug + go Modularität

Systemgelenke mit **plug + go Modularität** verfügen über baugleiche Systemfußbügel, Gelenkoberteile und Montage-/Gießdummys. Alle funktionalen Unterschiede liegen in der Deckplatte, welche schnell und unkompliziert ausgetauscht werden kann, um zwischen den Systemgelenken umzurüsten. Zu den Systemgelenken mit **plug + go Modularität** zählen u. a. das **NEURO VARIO 2**, das **NEURO VARIO-SWING** und das **NEURO SWING 2**.

**plug+go**  
MODULARITÄT

**NEURO**  
**VARIO-SPRING 2**



verbesserte Einbindung  
ins Laminat dank  
schrägem Federkanal

integrierte  
Geräuschkämpfung

besonders lange Lebensdauer  
durch neu konstruierte  
Druckfedern

erhältlich in Stahl und Titan



gerade



oben nach innen gekröpft



oben nach außen gekröpft



10 mm



12 mm



14 mm



16 mm



20 mm