

Algemeen verzorgingsformulier

EVO/KEVO/KO

www.orthosis-configurator.com/nl

Orthopedisch technicus: _____

Firma: _____

Klantnummer: _____

Datum: _____

Wij wijzen erop dat persoonlijke patiëntgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van de opdracht en voor een statistische analyse. Denk eraan dat de berekening van de belasting van de orthese betrekking heeft op de hier vermelde gegevens. In de loop van het gebruik van de orthese kunnen deze gegevens veranderen. Houd reeds bij het invullen van dit verzorgingsformulier rekening met veranderingen die zich binnen afzienbare tijd kunnen voordoen (bijv. m.b.t. lichaamsgewicht, groei of veranderingen van de spierstatus).

PATIËNTGEGEVENS


Naam	Geboortejaar	Lichaamsgewicht	Been
		kg	linkerbeen rechterbeen
Vermeld omwille van de privacy uitsluitend de eerste twee letters van de voornaam en achternaam.	Geslacht	Lichaamslengte	Gebruik twee verzorgingsformulieren wanneer de volgende punten bij beide benen van elkaar verschillen.
	vrouw man non-binair	cm	

Aandoeningen en beperkingen

Gebruik het Algemene verzorgingsformulier alleen bij aandoeningen en beperkingen, waarvoor geen specifiek verzorgingsformulier in het downloadgedeelte beschikbaar is.

Schoenmaat

Schoenmaat (EU) (voetlengte + 1,5 cm) x 1,5

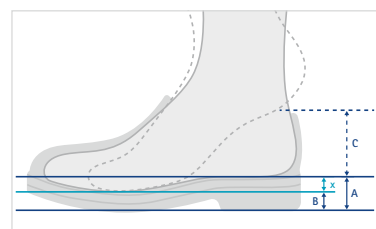

Hakhoogte (A)

mm

Heel drop ($x = A - B$)

mm

Zooldikte (B)

mm

Hoogtecompensatie (C)

mm

Bewegingsvrijheid in BSG



Dorsaal

Plantair

o

o

Instabiliteiten/verkeerde standen op knieniveau

Fysiologische stand


Verkeerde varusstand

maximaal

met orthese
te verwachten

o

o

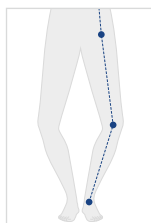


Verkeerde valgusstand

maximaal

met orthese
te verwachten

o

o

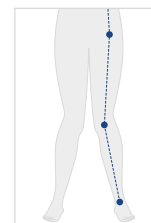

Fysiologische bewegingsomvang


Hyperextensie

maximaal

met orthese
te verwachten

o

o

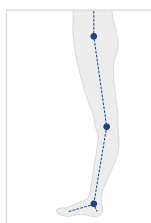


Extensiebeperking

maximale
extensie

o

met orthese
te verwachten

o

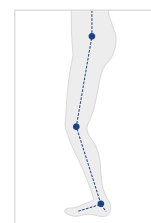

PR9050-NL-2025-06

FIOR & GENTZ

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Duitsland)

+49 4131 24445-0
+49 921 95659554

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ

EVO/KEVO/KO

www.orthosis-configurator.com/nl


Instabiliteiten/bewegingsbeperkingen op heupniveau

Fysiologische bewegingsomvang

Extensiebeperking

maximale
extensie

o

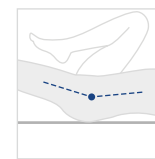

Stavermogen bij de diagnose (evt. met hulp)

De diagnose kon (deels) staand worden verricht.


ja

nee

Verloop van de loodlijn (uitgaand van het zwaartepunt van het lichaam)


De loodlijn loopt door of vóór het kniedraaipunt.

Dit kan ook bij grotere extensiebeperkingen het geval zijn die bijv. door het voorover buigen van het bovenlichaam gecompenseerd of in de orthese gecorrigeerd kunnen worden.

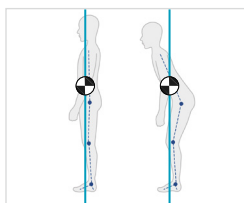

De loodlijn loopt achter het kniedraaipunt.

Dit kan bij grotere extensiebeperkingen het geval zijn die niet gecompenseerd of in de orthese gecorrigeerd kunnen worden.

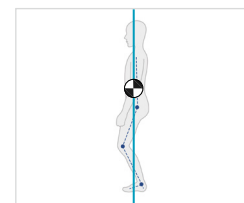

Spierstatus (beoordeling volgens Janda)

0 (nul) 1 (klein beetje) 2 (zeer zwak) 3 (zwak) 4 (goed) 5 (normaal)

Heupflexie

0 1 2 3 4 5

Knie-extensie

0 1 2 3 4 5

Dorsaal-extensie

0 1 2 3 4 5

Heupextensie

0 1 2 3 4 5

Knieflexie

0 1 2 3 4 5

Plantairflexie

0 1 2 3 4 5



Activiteit



1. Binnenshuis lopen



2. Beperkt buitenshuis lopen



3. Onbeperkt buitenshuis lopen



4. Onbeperkt buitenshuis lopen met zeer hoge eisen

Eisen aan de orthese



Te lopen traptreden per dag

< 10

11-50

> 50



Te lopen hoogtemeters per dag

< 10

11-50

> 50




De patiënt(e) kan het systeemknelgewricht met één hand veilig bereiken.

ja

nee

AP-maat (voor het mechanische kniedraaipunt bij een KEVO of KO)

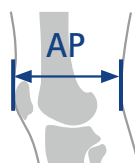

mm

ORTHESEGEGEVENS

Notities van het gesprek met de patiënt(e) (bijv. voorgaande behandeling)