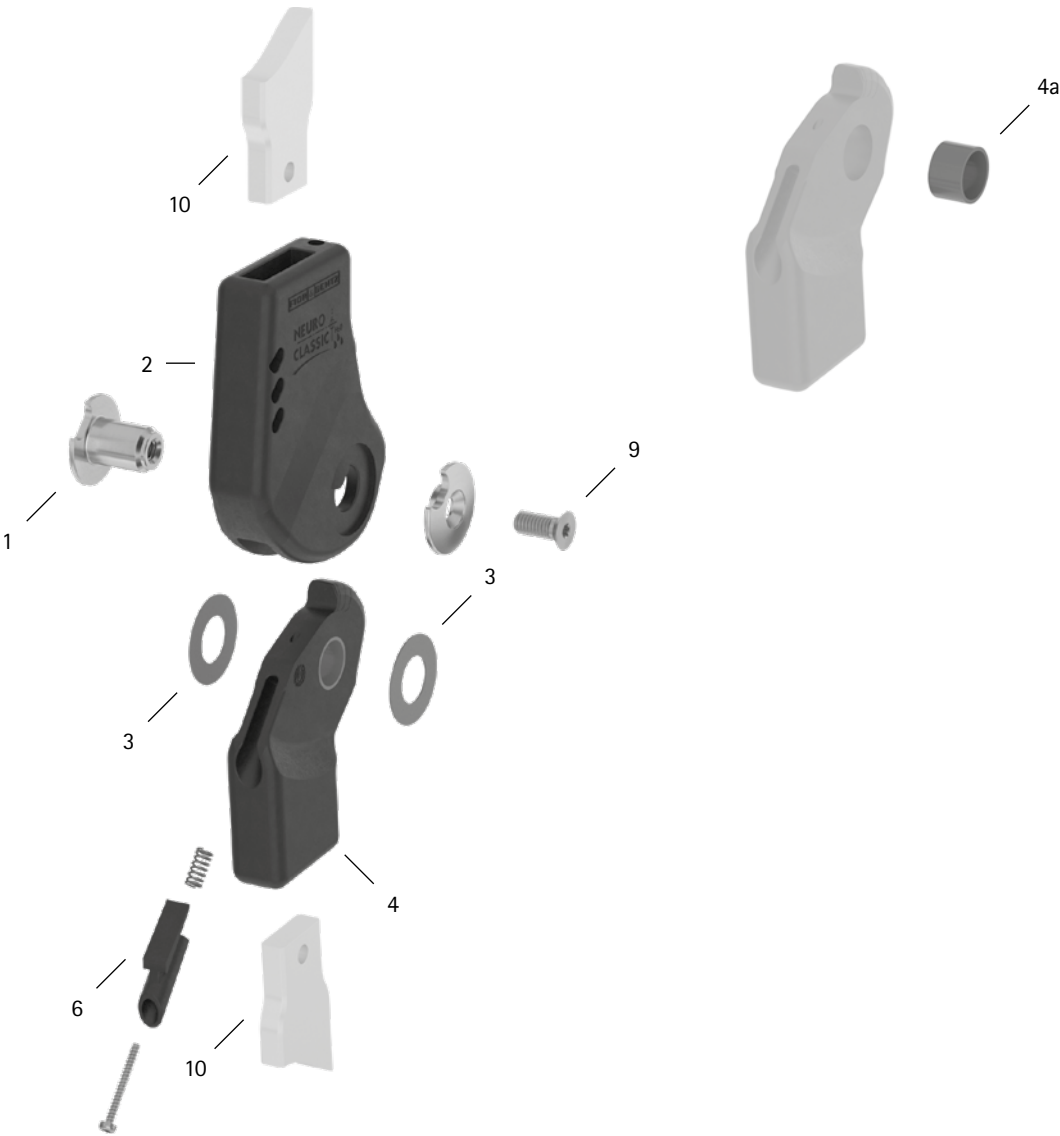




Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SK0892-1/C	Splintbolzen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SL0102-C	Oberteil, gerade, Carbon	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
3	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2009-045					
3	GS2009-050					
3	GS2009-055					
3	GS2009-060					
4	SK0812-2/C	5° Unterteil mit Gleitbuchse, gerade, Carbon-Titan-Hybrid	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
4a	BP1009-L059	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SK9802-E005/C	5° Extensionsanschlag	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
9	SC1404-L10	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemanker und Systemschienen						
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten