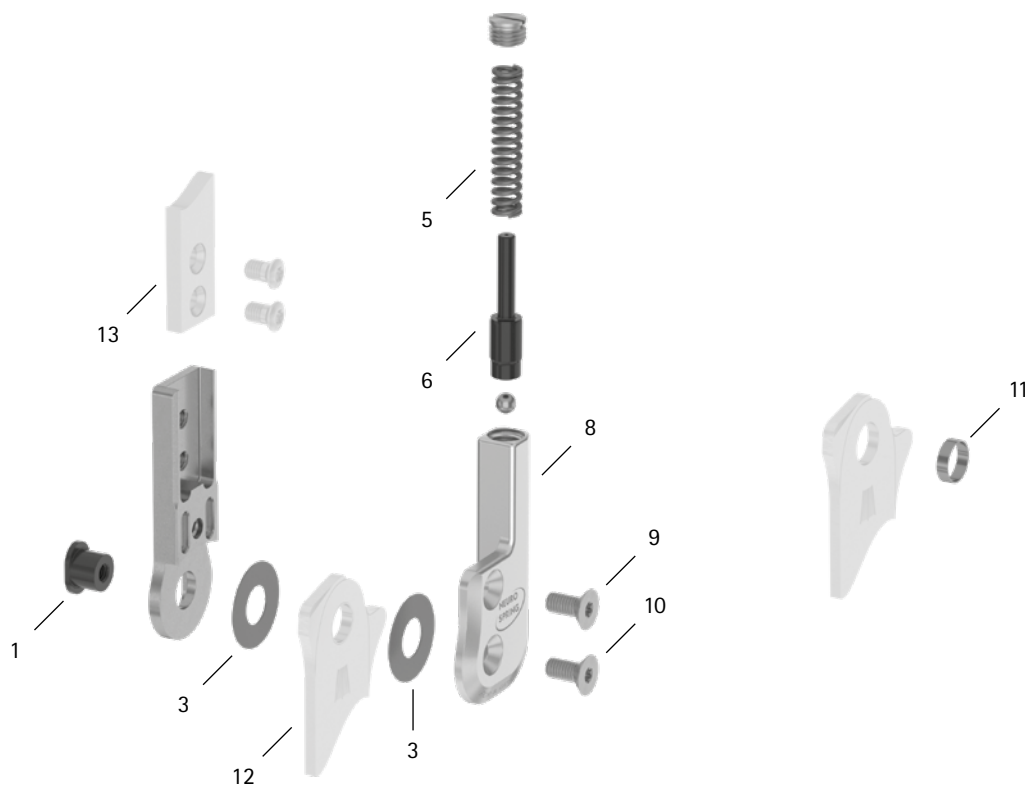




Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB9669-L0710	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2210-040	Gleitscheibe, Ø = 22 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2210-045					
3	GS2210-050					
3	GS2210-055					
3	GS2210-060					
5	FE2836-02	Druckfeder, goldfarben	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SF0343-72	Bolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SF0363-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SF0363-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral				
9	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
10	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
11	BR1110-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
12	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
13	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten