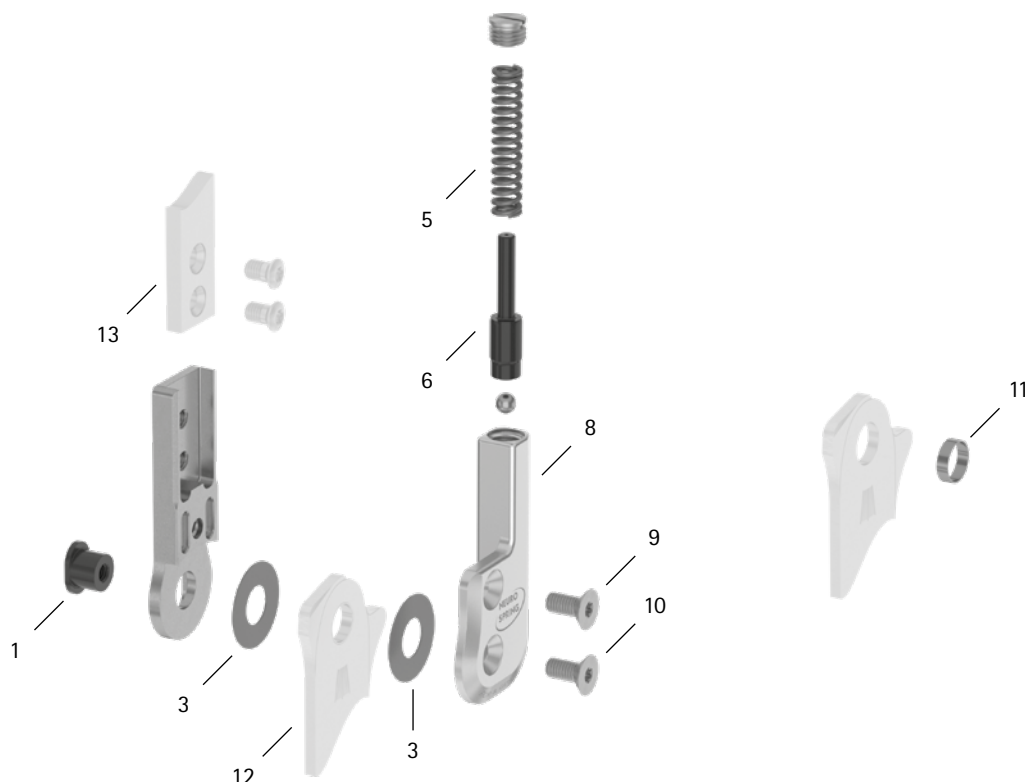




Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L0760	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2611-040	Gleitscheibe, Ø = 26 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2611-045					
3	GS2611-050					
3	GS2611-055					
3	GS2611-060					
5	FE2752-02	Druckfeder, goldfarben	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SF0345-81	Bolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SF0365-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SF0365-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral				
9	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
10	SC1406-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
11	BR1110-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
12	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
13	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

WP0019-DE-2023-01