
Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

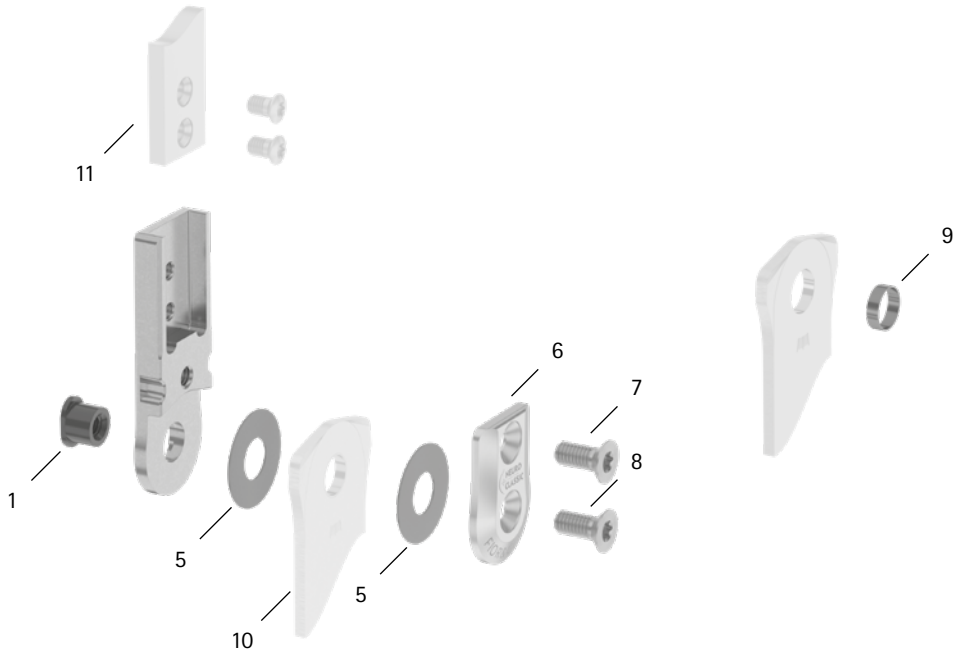

Pos.	24 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1262-L1190	Splintbolzen, kurz**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	GS3013-040	Gleitscheibe, Ø = 30 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS3013-045					
5	GS3013-050					
5	GS3013-055					
5	GS3013-060					
6	SF0167-3/AL	Deckplatte**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1416-L16	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1416-L16	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
1, 6-8	SF1987-AL	Funktionseinheit plug + go Modularität***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
9	BR1413-L070	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
11	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten
** ist Bestandteil der Funktionseinheit
*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar

WP0134-DE-2026-09