

Orthopedische schoenen

DIABETES



MECARE



POST-OP



Welkom



Beste klanten,

Deze catalogus bevat alle indicatiespecifieke orthopedische schoenmodellen van FIOR & GENTZ: de orthopedische schoenen DIABETES, HOMECARE en POST-OP.

ORTHOPEDISCHE
SCHOENEN
DIABETES

De orthopedische schoenen DIABETES zijn bij uitstek geschikt voor diabetische voeten. Voor een uniforme communicatie hebben we de classificatie van diabetische voeten op de pagina's 8-9 bij elkaar gezet. Op alle productpagina's vindt u een dienovereenkomstige verwijzing.

ORTHOPEDISCHE
SCHOENEN
HOMECARE

De orthopedische schoenen HOMECARE zijn geschikt voor het verblijf in de (revalidatie)kliniek, in het woonzorgcentrum of gewoon voor het dragen thuis.

De combinatie van bescherming en een verhoogd comfort kenmerkt de orthopedische schoenen HOMECARE. Alle schoenmodellen beschikken over een flexibele zool en kunnen zowel binnen als buiten worden gedragen.

ORTHOPEDISCHE
SCHOENEN
POST-OP

De orthopedische schoenen POST-OP werden speciaal ontworpen voor de verzorging na een operatie of letsel. De schoenen zijn onderverdeeld in verband- en ontlastende schoenen.

De inhoudsopgave geeft u een overzicht van de verschillende schacht- en zoolconstructies. Alle details over het betreffende schoenmodel vindt u direct op de overeenkomende productpagina. Ook de passende binnenzolen worden daar vermeld.

Informatie over de schoenmaten en de meetmethodes vindt u vanaf pagina 8, bijpassend toebehoren zoals bijv. beschermkappen vanaf pagina 52.

Wij streven ernaar u met onze producten zo goed mogelijk te ondersteunen bij de patiëntverzorging.

Met een vriendelijke groet uit Lüneburg,
Het team van FIOR & GENTZ

Inleiding

De diabetische voet	6
Binnenmaten van de schoen	8
Schoeneigenschappen.....	10

Verbandschoenen

ASYMMETRISCHE SCHOENEN MET HOGE SCHACHT

Flexibele zool met heel drop, 30 mm dik

LEIPZIG D H	12
---------------------------------	----

Stijve zool met extra grote afwikkelpalk en heel drop, 30 mm dik

FLENSBURG D P	14
ERFURT D P	16
AUGSBURG D P	18
DRESDEN D	20
KASSEL D	22

ASYMMETRISCHE SCHOENEN MET LAGE SCHACHT

Flexibele zool met heel drop, 30 mm dik

KONSTANZ D H	24
HEIDELBERG D H	26

Stijve zool met extra grote afwikkelpalk en heel drop, 30 mm dik

NÜRNBERG D	28
-------------------------	----

SYMMETRISCHE SCHOENEN MET LAGE SCHACHT

Stijve zool met extra grote afwikkelpalk en heel drop, 30 mm dik

BREMEN P	30
MADRID P	31
STUTTGART P	32

SYMMETRISCHE SCHOENEN MET HOGE SCHACHT

Stijve zool met extra grote afwikkelpalk en rechte bovenkant, 30 mm dik

AMSTERDAM P	33
FREIBURG P	34
REGENSBURG P	35

Voorvoet ontlastende schoenen

SYMMETRISCHE SCHOENEN MET HOGE SCHACHT

Stijve zool met extra grote afwikkelpalk en rechte bovenkant, 40 mm dik

KOPENHAGEN P	36
---------------------------	----

- D** Orthopedische schoenen DIABETES
- H** Orthopedische schoenen HOMECARE
- P** Orthopedische schoenen POST-OP



SYMMETRISCHE SCHOENEN MET HOGE SCHACHT

8° wigvormige zool (60:40) met afwikkelbalk, 30 mm dik	
LONDON P	37
8° wigvormige zool (60:40) met voorvoetondersteuning, 30 mm dik	
HANNOVER P	38
MAILAND P	39
KÖLN P	40
STOCKHOLM P	41
10° wigvormige zool (50:50) met voorvoetondersteuning, 30 mm dik	
STENDAL P	42
10° wigvormige zool (50:50) zonder voorvoetondersteuning, 40 mm dik	
BERLIN P	44

Achtersvoet ontlastende schoenen

ASYMMETRISCHE SCHOENEN MET HOGE SCHACHT

Stijve zool met extra grote afwikkelbalk en heel drop, 30 mm dik	
WETZLAR D	45

SYMMETRISCHE SCHOENEN MET HOGE SCHACHT

5° wigvormige zool (20:80) zonder achtersvoetondersteuning, 30 mm dik	
MÜNCHEN P	46
WUPPERTAL P	47

AANVULLENDE INFORMATIE

Reserveonderdelen en toebehoren – set binnenzolen & onbewerkte inlegzool.....	48
Overzicht van de 'Hilfsmittelverzeichnisnummer' (hulpmiddelcatalogusnummers)	55

Verkoop binnendienst

Voor vragen, bestellingen en de bewerking van uw klantgegevens kunt u ons van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur bereiken op +49 4131 24445-0.

Wanneer u vóór 16:15 uur bestelt, versturen wij de goederen nog diezelfde dag. Bezorging op zaterdag en spoedleveringen zijn mogelijk.



Classificatie van diabetische voeten

Een diabetische voet ontstaat vanuit diabetes mellitus en omvat allerlei verschillende symptomen. Oorzaken voor een diabetische voet zijn daarbij een neuropathische of ischemische voet of een mengvorm van beide.

Bij de eerste vorm ontstaat er vanwege een permanent verhoogde bloedsuikerspiegel een zenuwbeschadiging, waardoor de spieren verslappen en de ligamenten in de voet inzakken.

Bij de diabetespatiënt(e) doen zich daarbij bijvoorbeeld een doof gevoel, drukplekken op de voetzool en/of tenen evenals een droge, zeer kwetsbare huid voor. Als er zweren ontstaan, kunnen deze chronische wonden worden die nog maar slecht genezen.

Is er daarentegen sprake van een ischemische voet, dan is de arteriële doorbloeding verstoord. Daardoor kunnen dan hele weefselgebieden afsterven.

Over het algemeen is de wondverzorging een essentieel bestanddeel van de therapie bij een diabetische voet, omdat er vaak sprake is van een verstoorde wondgenezing die na een verkeerde belasting van de voet ook vaak amputaties van de extremiteiten tot gevolg kan hebben.

Bij een verzorging van diabetische voeten moet absoluut worden gelet op de oorzaak, omdat de betreffende therapie op veel gebieden fundamenteel verschilt of zelfs gecontra-indiceerd is.

Daarnaast is de correcte inschatting van de aanwezige risicogroep van groot belang om (verder) letsel te kunnen vermijden en een geschikte verzorging van elke individuele patiënt(e) te kunnen waarborgen.

In deze catalogus vindt u orthopedische schoenen DIABETES voor de risicogroepen II, III en VII. Onder de productinformatie bij elke schoen vindt u in het gedeelte Indicaties (voor diabetes) ons advies, voor welke risicogroepen en wondstadia de betreffende orthopedische schoen DIABETES bij uitstek geschikt is. Onze informatie is daarbij gebaseerd op de classificaties hiernaast.

Risicogroepen van de diabetische voet*

risicogroep 0	diabetes mellitus zonder polyneuropathie (PNP)/perifeer arterieel vaatlijden (PAV)
risicogroep I	als risicogroep 0, met voetdeformiteit
risicogroep II	diabetes mellitus met verlies van sensibiliteit door PNP/relevant PAV
risicogroep III	toestand na plantaire ulcus
risicogroep IV	als risicogroep II met deformiteiten of disproporties
risicogroep V	diabetische neuro-osteoartropathie (DNOAP) (LEVIN III)
risicogroep VI	als risicogroep II met gedeeltelijke voetamputatie
risicogroep VII	acute laesie

*volgens 'AG Fuß: Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß der Deutschen Diabetes Gesellschaft' (stand 25-02-2006)

Wondstadia van de diabetische voet**

	graad 0	graad 1	graad 2	graad 3	graad 4	graad 5
A	pre- en postulceratieve laesie	oppervlakkige wond	wond tot op het niveau van de pees of het kapsel	wond tot op het niveau van het bot of het gewricht	necrose van voetgedeeltes	necrose van de gehele voet
B	met infectie	met infectie	met infectie	met infectie	met infectie	met infectie
C	met ischemie	met ischemie	met ischemie	met ischemie	met ischemie	met ischemie
D	met infectie en ischemie	met infectie en ischemie	met infectie en ischemie	met infectie en ischemie	met infectie en ischemie	met infectie en ischemie

**volgens Wagner (graad 0-5) en Armstrong (stadium A-D)

Classificatie van diabetische voeten volgens Wagner

graad 0	pre- en postulceratieve voet
graad 1	oppervlakkige wond, echter huid en onderhuids bindweefsel aangedaan
graad 2	wond tot op het niveau van de pezen of kapsels
graad 3	wond tot op het niveau van botten en gewrichten
graad 4	necrose van voetgedeeltes
graad 5	necrose van de gehele voet

Armstrong-stadia van de diabetische voet

stadium A	neuropathische voet zonder infectie
stadium B	neuropathische voet met infectie
stadium C	met ischemie
stadium D	met infectie en ischemie

Schoenverzorging

Risicogroepen II en III

Voor de verzorging van diabetes mellitus met verlies van sensibiliteit door PNP/relevant PAV en/of van een toestand na plantaire ulcus wordt gewoonlijk een orthopedische schoen met een aan diabetes aangepast voetbed of een orthopedische schoenaanpassing gebruikt. Daarom bieden wij bij alle orthopedische schoenen DIABETES een onbewerkte inlegzool of set binnenzolen aan, die zodanig kan worden bewerkt dat plantaire drukplekken worden ontlast. De inlegzool/binnenzool kan als tussenoplossing worden gedragen tot het op de patiënt(e) afgestemde, aan diabetes aangepaste voetbed werd voltooid. Bovendien bieden de orthopedische schoenen DIABETES voldoende ruimte om probleemloos een dik(ke) inlegzool/binnenzool/voetbed te kunnen gebruiken, zonder dat de voet daarbij wordt bekneld. Mocht er vanwege verbanden, verkeerde standen/vervormingen van de voet e.d. meer ruimte nodig zijn, dan kan het binnenvolume aangepast, een bredere schoenvariant gekozen of het (binnen)materiaal verder bewerkt worden.

Risicogroep VII

Als orthopedische schoenen voor laesies worden gewoonlijk ontlastings-, verband-, interim- en orthese-schoenen met een aan diabetes aangepast voetbed of een orthopedische schoenaanpassing aanbevolen. De door ons voor deze verzorging aangeboden schoenen bieden, vooral in de variant BREED, voldoende ruimte voor zowel een individueel voetbed als voor aanvullend door de patiënt(e) gedragen verbanden en/of ortheses. Dankzij de klittenbandsluitingen, de brede schoenvarianten en het bewerkbare (binnen)materiaal kunnen de schoenen ook op niet-plantaire plekken gericht ontlasten. Verder zorgen de stijve zoolconstructie en de hoge schacht voor stabiliteit en zekerheid bij het staan en lopen.

Beste klant,

Wij hebben onze orthopedische schoenen op basis van het Mondopoint-systeem opgemeten. Vervolgens werden de schoenmaten met behulp van de Parijse steek opnieuw berekend.

Mondopoint-systeem

Het Mondopoint-systeem is een internationaal genormeerd systeem voor het aangeven van schoenmaten. Het verschil met andere systemen is dat niet alleen de binnenlengte van de schoen, maar ook de binnenbreedte van de schoen wordt gemeten.

Parijse steek


Voor het bepalen van de schoenmaten hebben we de Parijse steek gebruikt. Deze wordt als volgt berekend:

$(\text{voetlengte} + 1,5 \text{ cm}) \times 1,5$

Lengte en breedte worden in mm aangegeven.

LET OP!

We geven in deze schoenencatalogus maten voor straatschoenen aan. Benodigde ruimte voor eventuele verbanden werd niet mee gepland.

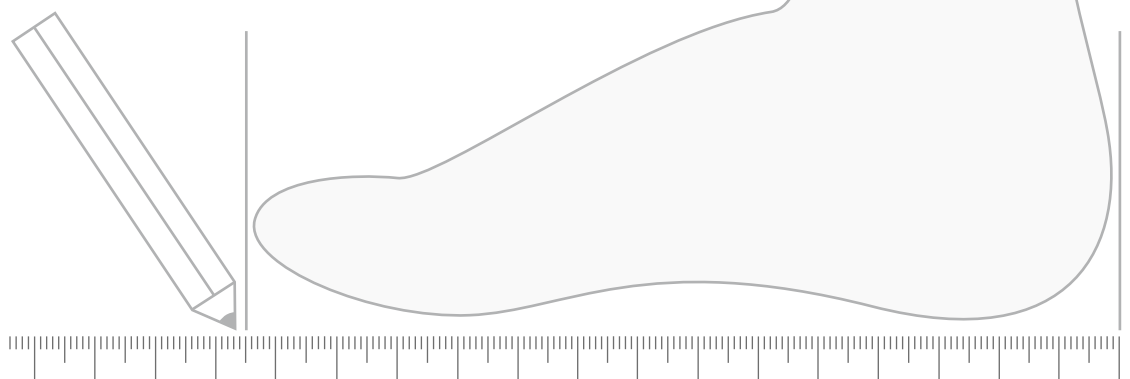

Asymmetrische schoenen

Binnenlengte van schoen


De binnenlengte van de schoen (c) werd met een standaard meetapparaat gemeten vanaf het midden van de hiel tot aan het midden van de grote teen.

Binnenbreedtes van schoen (bal- en hielgedeelte)

De binnenbreedtes van de schoen werden bij de binnenzool gemeten. Voor de binnenbreedte van de schoen in het balgedeelte werd uitgaand van de schoenpunt bij 1/3 van de binnenzool een dwarslijn getrokken. Langs deze loodrechte lijn werd een hoek van 15° afgetekend.

De lijn die daarbij ontstond, was onze meetlijn voor de binnenbreedte van de schoen in het balgedeelte (a).

De binnenbreedte van de schoen in het hielgedeelte (b) werd ter hoogte van het hielmidden gemeten.

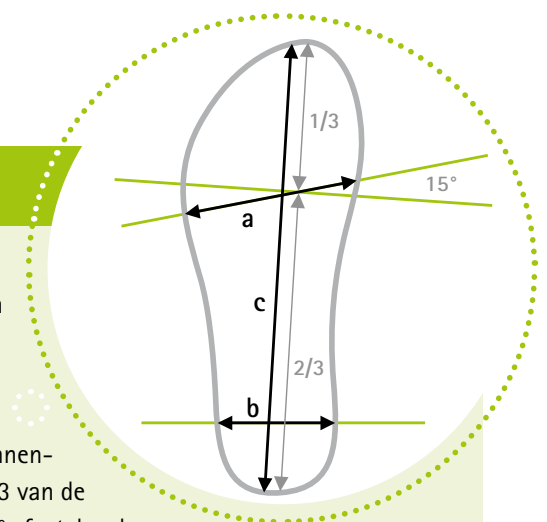

CROSSROADS

Ortheseschoen. Anders.

FIOR & GENTZ



*Met elastische loopzool
van EVA-materiaal*

*Met elastische platte
vibram®-zool*

Een comfortabele pasvorm met en zonder orthese.

De CROSSROADS orthoseschoenen garanderen door hun specifieke constructie en het speciaal afgestemde materiaal altijd een goede pasvorm. Het geïntegreerde, elastische textielmateriaal evenals twee uitneembare binnenzolen bieden een flexibel volume. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een loopzoolverhoging met een EVA-plaat te maken of een platte vibram®-zool voor meer stroefheid onder de schoen aan te brengen. CROSSROADS is in vier verschillende combinaties van de breedtematen REGULAR en SLIM verkrijgbaar. Zo zit hij aan elke voet comfortabel, met en zonder orthese.

Schoenmaat		Gebruik
heel drop*	15 mm	h-Cast
hakhoogte**	25 mm	Orthese-configurator

*De hoogte van de heel drop komt overeen met de hoogte van de h-Cast-plaat die bij de diagnose moet worden gebruikt.

**De hakhoogte wordt in de Orthese-configurator als onderdeel van de berekeningsbasis genoteerd.

maat	36-48	
materiaal	hoogwaardig leer – gecertificeerd runderleer als bovenmateriaal en kalfsleer als binnenvoering zorgen voor een maximaal draagcomfort	
schoenvoeringen	REGULAR links en rechts SLIM links en rechts	REGULAR links/SLIM rechts SLIM links/REGULAR rechts

Alle orthoseschoenen worden voor elke schoenmaat als paar verkocht.



WASBAAR

Alle orthopedische schoenen kunnen op 40 °C worden gewassen.

INDOOR & OUTDOOR

Ook alle orthopedische schoenen HOMECARE zijn bij uitstek geschikt voor zowel activiteiten binnen als buiten.

ADEMEND

Alle orthopedische schoenen zijn voorzien van ademend bovenmateriaal.

LOOPZOLEN

De meeste loopzolen zijn 30 mm dik en zijn gemaakt van massief EVA-materiaal en rubber. De stijve zolen van de DIABETES- en POST-OP-schoenen kunnen door de bewerking van de zoolkern en/of verlijming worden aangepast aan patiëntspecifieke bijzonderheden. Bovendien verhindert de constructie van de orthopedische schoenen POST-OP een flexie van de teenbasisgewrichten en zorgt ervoor dat de voet van de patiënt(e) gestabiliseerd en geïmmobiliseerd wordt. Zo wordt een aanwezige wond optimaal ontlast en de wondgenezing zo goed mogelijk ondersteund. De zolen van de orthopedische schoenen HOMECARE zijn flexibel en beschikken over een lichte wigvormige hak. Deze zoolconstructie ondersteunt een natuurlijke afwikkeling bij het lopen.

VERSTERKT HIELSTUK

Alle orthopedische schoenen met een gesloten hielgedeelte zijn voorzien van een versterkt hielstuk, dat de patiënt(e) steun geeft, de hiel opvult en voor comfortabele stabiliteit zorgt.

SLUITINGSYSTEEM

Veel orthopedische schoenen kunnen dankzij de klittenbandsluitingen heel gemakkelijk worden geopend en gesloten. Daarbij zorgen grote klitchechtvlakken op de schoen voor individueel draagcomfort. Bovendien zijn de klittenbandsluitingen voorzien van extra naden, zodat ze indien nodig kunnen worden ingekort.

AANPASBAAR BINNENVOLUME

Met behulp van de in te korten klittenbandsluitingen of ruime klittenband- en gespsluitingen en de uitneembare binnenzolen kan het binnenvolume worden aangepast aan de individuele benodigde ruimte voor een patiënt(e).

BINNENZOLEN

In veel orthopedische schoenmodellen bevinden zich EVA-binnenzolen, waarvan de bovenste binnenzool een antimicrobiële coating heeft. Door de bewerking van de binnenzolen kunnen het binnenvolume en de hardheidsgraad van de bekleding aan individuele ruimte- en draagbehoeften worden aangepast. Indien gewenst kunnen de binnenzolen worden vervangen door een individueel voetbed.



Productinformatie

INDICATIES VOOR DIABETES

LEIPZIG is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

risicogroep II: diabetes mellitus met verlies van sensibeleit door PNP/relevant PAV

graad 0: pre- en postulceratieve voet

risicogroep III: toestand na plantaire ulcus

graad 0: toestand na een laesie, voet die risico loopt

INDICATIES VOOR HOMECARE

LEIPZIG is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden (bijv. door traumatisch letsel) of zwellingen (door overige indicaties) in de voet een gesloten schoen met een flexibele zool en een grote, aanpasbare binnenruimte nodig hebben.

ZOOLCONSTRUCTIE



LEIPZIG heeft een 30 mm dikke, flexibele zool met heel drop. Deze zoolconstructie ondersteunt een natuurlijke afwikkeling bij het lopen.

BINNENZOLEN

In de schoen bevinden zich drie 5 mm dikke EVA-binnenzolen (F00053-XX), waarvan de bovenste binnenzool een antimicrobiële coating heeft. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** als tussenoplossing kunnen via deze binnenzolen drukontlastingen worden uitgevoerd tot ze worden vervangen door een aan diabetes aangepast voetbed.

BIJZONDERHEDEN

LEIPZIG biedt veel ruimte voor speciale eisen aan ruimte. Met de ruime klittenbandsluitingen en de rits bij de hiel kan deze schoen zeer breed geopend en dus gemakkelijk aan- en uitgetrokken worden. Bovendien beschikt de schoen over een geïntegreerde teenkap voor meer stabiliteit en bescherming rond de tenen.

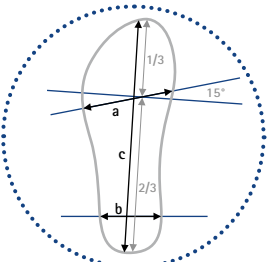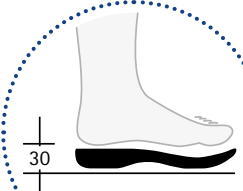

LEIPZIG

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	95	66	227	TS5512-35	TS5512-35/L	TS5512-35/R
36	96	67	233	TS5512-36	TS5512-36/L	TS5512-36/R
37	98	68	239	TS5512-37	TS5512-37/L	TS5512-37/R
38	100	70	246	TS5512-38	TS5512-38/L	TS5512-38/R
39	101	70	251	TS5512-39	TS5512-39/L	TS5512-39/R
40	102	71	252	TS5512-40	TS5512-40/L	TS5512-40/R
41	103	73	266	TS5512-41	TS5512-41/L	TS5512-41/R
42	105	73	270	TS5512-42	TS5512-42/L	TS5512-42/R
43	108	75	278	TS5512-43	TS5512-43/L	TS5512-43/R
44	109	75	284	TS5512-44	TS5512-44/L	TS5512-44/R
45	111	76	290	TS5512-45	TS5512-45/L	TS5512-45/R
46	112	77	294	TS5512-46	TS5512-46/L	TS5512-46/R
47	113	78	302	TS5512-47	TS5512-47/L	TS5512-47/R
48	114	78	310	TS5512-48	TS5512-48/L	TS5512-48/R
49	116	80	315	TS5512-49	TS5512-49/L	TS5512-49/R
50	118	81	320	TS5512-50	TS5512-50/L	TS5512-50/R

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



LEIPZIG

HMV-nr.: 31.03.03.4040



Productinformatie

INDICATIES VOOR DIABETES

FLensburg is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

- risicogroep III:** toestand na plantaire ulcus
- graad 0:** toestand na een laesie
- risicogroep VII:** acute laesie
- graad 1:** oppervlakkige wond
- graad 2:** wonden tot aan de pees/het kapsel, plantaire ulcera bij de voorvoet
- graad 4:** begrensde necrose bij de voorvoet, toestand na teenamputatie
- graad 4-5:** gedeeltelijke amputatie van de voorvoet, bijv. toestand na het verwijderen van enkele tenen bij behoud van het basisgewricht van de grote teen

INDICATIES VOOR POST-OP

FLensburg is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden aan de voet/bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel), zwellingen in de voet (bijv. door ontstekingen) of gewrichtspijn in de voet (bijv. door reuma of artrose) een gesloten schoen met een individueel aanpasbare binnenruimte en een hoge schacht nodig hebben.

SCHOENUITVOERINGEN

De asymmetrische verbandschoen FLensburg is in de breedtes STANDARD en BREED verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE

FLensburg heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelpalk en heel drop. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** de stijve zool verhindert een flexie van de teenbasisgewrichten en zorgt ervoor dat de voet van de patiënt(e) gestabiliseerd en geïmmobiliseerd wordt. Zo wordt een aanwezige wond optimaal ontlast en de wondgenezing zo goed mogelijk ondersteund.

BINNENZOLEN

In de schoen bevinden zich drie 5 mm dikke EVA-binnenzolen (STANDARD F00053-XX en BREED F00054-XX), waarvan de bovenste binnenzool een antimicrobiële coating heeft. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** als tussenoplossing kunnen via deze binnenzolen drukontlastingen worden uitgevoerd tot ze worden vervangen door een aan diabetes aangepast voetbed.

BIJZONDERHEDEN

FLensburg biedt met name in de variant BREED veel ruimte voor speciale eisen aan ruimte. Met behulp van de rits bij de hiel kan de schoen worden aan- en uitgetrokken zonder de klittenbandsluitingen te hoeven openen. Bovendien beschikt de schoen over een geïntegreerde teenkap voor meer stabiliteit en bescherming rond de tenen.




FLENSBURG

HMV-nr.: 31.03.03.4073


FLENSBURG STANDARD

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	95	66	227	TS5311-35	TS5311-35/L	TS5311-35/R
36	96	67	233	TS5311-36	TS5311-36/L	TS5311-36/R
37	98	68	239	TS5311-37	TS5311-37/L	TS5311-37/R
38	100	69	246	TS5311-38	TS5311-38/L	TS5311-38/R
39	101	70	251	TS5311-39	TS5311-39/L	TS5311-39/R
40	102	73	257	TS5311-40	TS5311-40/L	TS5311-40/R
41	105	75	262	TS5311-41	TS5311-41/L	TS5311-41/R
42	107	75	272	TS5311-42	TS5311-42/L	TS5311-42/R
43	108	76	280	TS5311-43	TS5311-43/L	TS5311-43/R
44	109	78	290	TS5311-44	TS5311-44/L	TS5311-44/R
45	111	78	291	TS5311-45	TS5311-45/L	TS5311-45/R
46	112	80	299	TS5311-46	TS5311-46/L	TS5311-46/R
47	113	80	308	TS5311-47	TS5311-47/L	TS5311-47/R
48	114	83	315	TS5311-48	TS5311-48/L	TS5311-48/R
49	116	80	315	TS5311-49	TS5311-49/L	TS5311-49/R
50	118	81	320	TS5311-50	TS5311-50/L	TS5311-50/R

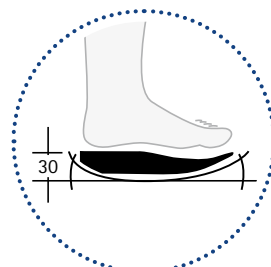

FLENSBURG BREED

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	105	69	233	TS5911-35	TS5911-35/L	TS5911-35/R
36	107	69	240	TS5911-36	TS5911-36/L	TS5911-36/R
37	109	70	240	TS5911-37	TS5911-37/L	TS5911-37/R
38	110	71	248	TS5911-38	TS5911-38/L	TS5911-38/R
39	111	72	252	TS5911-39	TS5911-39/L	TS5911-39/R
40	112	73	260	TS5911-40	TS5911-40/L	TS5911-40/R
41	112	74	265	TS5911-41	TS5911-41/L	TS5911-41/R
42	113	75	270	TS5911-42	TS5911-42/L	TS5911-42/R
43	115	76	277	TS5911-43	TS5911-43/L	TS5911-43/R
44	120	77	287	TS5911-44	TS5911-44/L	TS5911-44/R
45	123	78	290	TS5911-45	TS5911-45/L	TS5911-45/R
46	123	78	298	TS5911-46	TS5911-46/L	TS5911-46/R
47	125	81	305	TS5911-47	TS5911-47/L	TS5911-47/R
48	126	82	313	TS5911-48	TS5911-48/L	TS5911-48/R
49	127	84	324	TS5911-49	TS5911-49/L	TS5911-49/R
50	130	85	330	TS5911-50	TS5911-50/L	TS5911-50/R

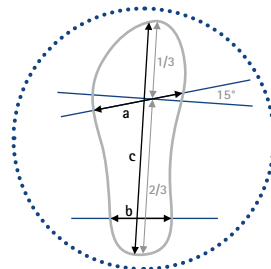

→ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



Productinformatie

INDICATIES VOOR DIABETES

ERFURT is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

risicogroep III: toestand na plantaire ulcus

graad 0: toestand na een laesie

risicogroep VII: acute laesie

graad 1: oppervlakkige wond

graad 2: wonden tot aan de pees/het kapsel, plantaire ulcera bij de voorvoet

graad 4: begrensde necrose bij de voorvoet, toestand na teenamputatie

graad 4-5: gedeeltelijke amputatie van de voorvoet, bijv. toestand na het verwijderen van enkele tenen bij behoud van het basisgewricht van de grote teen

INDICATIES VOOR POST-OP

ERFURT is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden aan de voet/bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel), zwellingen in de voet (bijv. door ontstekingen) of gewrichtspijn in de voet (bijv. door reuma of artrose) een gesloten schoen met een wijd te openen sluitingstechniek en een hoge schacht nodig hebben.

SCHOENUITVOERINGEN

De asymmetrische verbandschoen ERFURT is in de breedtes STANDARD en BREED verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE

ERFURT heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelbalk en heel drop. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** de stijve zool verhindert een flexie van de teenbasisgewrichten en zorgt ervoor dat de voet van de patiënt(e) gestabiliseerd en geïmmobiliseerd wordt. Zo wordt een aanwezige wond optimaal ontlast en de wondgenezing zo goed mogelijk ondersteund.

BINNENZOLEN

In de schoen bevinden zich drie 5 mm dikke EVA-binnenzolen (STANDARD F00053-XX en BREED F00054-XX), waarvan de bovenste binnenzool een antimicrobiële coating heeft. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** als tussenoplossing kunnen via deze binnenzolen drukontlastingen worden uitgevoerd tot ze worden vervangen door een aan diabetes aangepast voetbed.

BIJZONDERHEDEN

ERFURT biedt met name in de variant BREED veel ruimte voor verbanden en speciale eisen aan ruimte. Met behulp van de rits bij de hiel kan de schoen worden aan- en uitgetrokken zonder de gespsluitingen te hoeven openen. Bovendien beschikt de schoen over een geïntegreerde teenkap voor meer stabiliteit en bescherming rond de tenen.



ERFURT



HMV-nr.: STANDARD 31.03.03.4029
BREED 31.03.03.4030

ERFURT STANDARD

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	95	66	227	TS5310-35	TS5310-35/L	TS5310-35/R
36	96	67	233	TS5310-36	TS5310-36/L	TS5310-36/R
37	98	68	239	TS5310-37	TS5310-37/L	TS5310-37/R
38	100	69	246	TS5310-38	TS5310-38/L	TS5310-38/R
39	101	70	251	TS5310-39	TS5310-39/L	TS5310-39/R
40	102	73	257	TS5310-40	TS5310-40/L	TS5310-40/R
41	105	75	262	TS5310-41	TS5310-41/L	TS5310-41/R
42	107	75	272	TS5310-42	TS5310-42/L	TS5310-42/R
43	108	76	280	TS5310-43	TS5310-43/L	TS5310-43/R
44	109	78	290	TS5310-44	TS5310-44/L	TS5310-44/R
45	111	78	291	TS5310-45	TS5310-45/L	TS5310-45/R
46	112	80	299	TS5310-46	TS5310-46/L	TS5310-46/R
47	113	80	308	TS5310-47	TS5310-47/L	TS5310-47/R
48	114	83	315	TS5310-48	TS5310-48/L	TS5310-48/R
49	116	80	315	TS5310-49	TS5310-49/L	TS5310-49/R
50	118	81	320	TS5310-50	TS5310-50/L	TS5310-50/R

ERFURT BREED

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	105	69	233	TS5410-35	TS5410-35/L	TS5410-35/R
36	107	69	240	TS5410-36	TS5410-36/L	TS5410-36/R
37	109	70	240	TS5410-37	TS5410-37/L	TS5410-37/R
38	110	71	248	TS5410-38	TS5410-38/L	TS5410-38/R
39	111	72	252	TS5410-39	TS5410-39/L	TS5410-39/R
40	112	73	260	TS5410-40	TS5410-40/L	TS5410-40/R
41	112	74	265	TS5410-41	TS5410-41/L	TS5410-41/R
42	113	75	270	TS5410-42	TS5410-42/L	TS5410-42/R
43	115	76	277	TS5410-43	TS5410-43/L	TS5410-43/R
44	120	77	287	TS5410-44	TS5410-44/L	TS5410-44/R
45	123	78	290	TS5410-45	TS5410-45/L	TS5410-45/R
46	123	78	298	TS5410-46	TS5410-46/L	TS5410-46/R
47	125	81	305	TS5410-47	TS5410-47/L	TS5410-47/R
48	126	82	313	TS5410-48	TS5410-48/L	TS5410-48/R
49	127	84	324	TS5410-49	TS5410-49/L	TS5410-49/R
50	130	85	330	TS5410-50	TS5410-50/L	TS5410-50/R

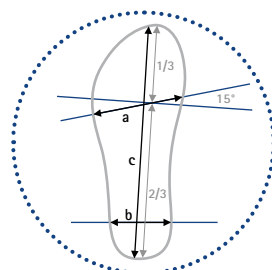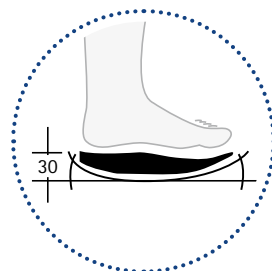

→ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



Productinformatie

INDICATIES VOOR DIABETES

AUGSBURG is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

- | | |
|-------------------------|--|
| risicogroep III: | toestand na plantaire ulcus |
| graad 0: | toestand na een laesie |
| risicogroep VII: | acute laesie |
| graad 1: | oppervlakkige wond |
| graad 2: | wonden tot aan de pees/het kapsel, plantaire ulcera bij de voorvoet |
| graad 4: | begrensde necrose bij de voorvoet, toestand na teenamputatie |
| graad 4-5: | gedeeltelijke amputatie van de voorvoet, bijv. toestand na het verwijderen van enkele tenen bij behoud van het basisgewricht van de grote teen |

INDICATIES VOOR POST-OP

AUGSBURG is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden aan de voet/bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel), zwellingen in de voet (bijv. door ontstekingen) of gewrichtspijn in de voet (bijv. door reuma of artrose) een schoen met een open teengedeelte en een hoge schacht nodig hebben.

SCHOENUITVOERINGEN

De asymmetrische orthopedische schoen AUGSBURG is in de breedtes STANDARD en BREED verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE

AUGSBURG heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelpalk en heel drop. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** de stijve zool verhindert een flexie van de teenbasisgewrichten en zorgt ervoor dat de voet van de patiënt(e) gestabiliseerd en geïmmobiliseerd wordt. Zo wordt een aanwezige wond optimaal ontlast en de wondgenezing zo goed mogelijk ondersteund.

BINNENZOLEN

In de schoen bevinden zich drie 5 mm dikke EVA-binnenzolen (STANDARD FO0053-XX en BREED FO0054-XX), waarvan de bovenste binnenzool een antimicrobiële coating heeft. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** als tussenoplossing kunnen via deze binnenzolen drukontlastingen worden uitgevoerd tot ze worden vervangen door een aan diabetes aangepast voetbed.

BIJZONDERHEDEN

AUGSBURG biedt met name in de variant BREED veel ruimte voor verbanden en speciale eisen aan ruimte. Bovendien kan bij een teengedeelte indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou.





HMV-nr.: STANDARD 31.03.03.4116
BREED 31.03.03.4135

AUGSBURG STANDARD

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	95	66	227	TS5381-35	TS5381-35/L	TS5381-35/R
36	96	67	233	TS5381-36	TS5381-36/L	TS5381-36/R
37	98	68	239	TS5381-37	TS5381-37/L	TS5381-37/R
38	100	69	246	TS5381-38	TS5381-38/L	TS5381-38/R
39	101	70	251	TS5381-39	TS5381-39/L	TS5381-39/R
40	102	73	257	TS5381-40	TS5381-40/L	TS5381-40/R
41	105	75	262	TS5381-41	TS5381-41/L	TS5381-41/R
42	107	75	272	TS5381-42	TS5381-42/L	TS5381-42/R
43	108	76	280	TS5381-43	TS5381-43/L	TS5381-43/R
44	109	78	290	TS5381-44	TS5381-44/L	TS5381-44/R
45	111	78	291	TS5381-45	TS5381-45/L	TS5381-45/R
46	112	80	299	TS5381-46	TS5381-46/L	TS5381-46/R
47	113	80	308	TS5381-47	TS5381-47/L	TS5381-47/R
48	114	83	315	TS5381-48	TS5381-48/L	TS5381-48/R
49	116	80	315	TS5381-49	TS5381-49/L	TS5381-49/R
50	118	81	320	TS5381-50	TS5381-50/L	TS5381-50/R

AUGSBURG BREED

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	105	69	225	TS5481-35	TS5481-35/L	TS5481-35/R
36	107	69	240	TS5481-36	TS5481-36/L	TS5481-36/R
37	109	70	240	TS5481-37	TS5481-37/L	TS5481-37/R
38	110	71	248	TS5481-38	TS5481-38/L	TS5481-38/R
39	111	72	252	TS5481-39	TS5481-39/L	TS5481-39/R
40	112	73	260	TS5481-40	TS5481-40/L	TS5481-40/R
41	112	74	265	TS5481-41	TS5481-41/L	TS5481-41/R
42	113	75	270	TS5481-42	TS5481-42/L	TS5481-42/R
43	115	76	277	TS5481-43	TS5481-43/L	TS5481-43/R
44	120	77	287	TS5481-44	TS5481-44/L	TS5481-44/R
45	123	78	290	TS5481-45	TS5481-45/L	TS5481-45/R
46	123	78	298	TS5481-46	TS5481-46/L	TS5481-46/R
47	125	81	305	TS5481-47	TS5481-47/L	TS5481-47/R
48	126	82	313	TS5481-48	TS5481-48/L	TS5481-48/R
49	127	84	324	TS5481-49	TS5481-49/L	TS5481-49/R
50	130	85	330	TS5481-50	TS5481-50/L	TS5481-50/R

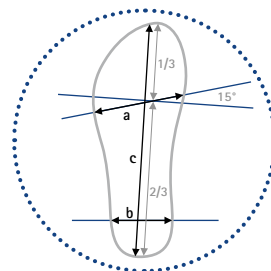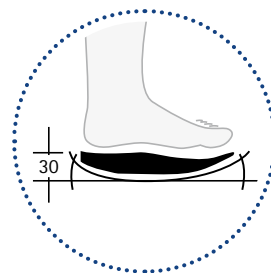

- ➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.
- ➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



Productinformatie

INDICATIES

DRESDEN is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

- risicogroep III:** toestand na plantaire ulcus
- graad 0:** toestand na een laesie
- risicogroep VII:** acute laesie
- graad 1:** oppervlakkige wond
- graad 2:** wonden tot aan de pees/het kapsel, plantaire ulcera bij de voorvoet
- graad 4:** begrensde necrose bij de voorvoet, toestand na teenamputatie
- graad 4-5:** gedeeltelijke amputatie van de voorvoet, bijv. toestand na het verwijderen van enkele tenen bij behoud van het basisgewricht van de grote teen

SCHOENUITVOERINGEN

De asymmetrische orthopedische schoen DIABETES DRESDEN is in de breedtes STANDARD en BREED verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE

DRESDEN heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelpalk en heel drop. De stijve zool verhindert een flexie van de teenbasisgewrichten en zorgt ervoor dat de voet van de patiënt(e) gestabiliseerd en geïmmobiliseerd wordt. Zo wordt een aanwezige wond optimaal ontlast en de wondgenezing zo goed mogelijk ondersteund.

BINNENZOLEN

De schoen wordt zonder binnenzool geleverd. Voor een succes van de behandeling op lange termijn moet de schoen met een aan diabetes aangepast voetbed worden gebruikt. Hiervoor kunt u het meegeleverde knippatroon als sjabloon gebruiken.


BIJZONDERHEDEN

DRESDEN biedt met name in de variant BREED veel ruimte voor speciale eisen aan ruimte. Het stevige buitenmateriaal kan van het zachte binnenmateriaal worden losgemaakt om mogelijke drukplekken te ontlasten en de vorming van oedeem te voorkomen. Bovendien is DRESDEN een geschikte TWINSHOE en zodoende een hoogtecompensatie voor de orthopedische schoen DIABETES WETZLAR.




DRESDEN STANDARD

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	93	63	239	TS5811-35	TS5811-35/L	TS5811-35/R
36	94	63	243	TS5811-36	TS5811-36/L	TS5811-36/R
37	95	65	248	TS5811-37	TS5811-37/L	TS5811-37/R
38	96	66	256	TS5811-38	TS5811-38/L	TS5811-38/R
39	99	67	264	TS5811-39	TS5811-39/L	TS5811-39/R
40	102	69	268	TS5811-40	TS5811-40/L	TS5811-40/R
41	102	70	272	TS5811-41	TS5811-41/L	TS5811-41/R
42	104	70	278	TS5811-42	TS5811-42/L	TS5811-42/R
43	105	70	290	TS5811-43	TS5811-43/L	TS5811-43/R
44	108	72	295	TS5811-44	TS5811-44/L	TS5811-44/R
45	108	73	300	TS5811-45	TS5811-45/L	TS5811-45/R
46	110	73	306	TS5811-46	TS5811-46/L	TS5811-46/R
47	113	75	315	TS5811-47	TS5811-47/L	TS5811-47/R
48	113	77	316	TS5811-48	TS5811-48/L	TS5811-48/R

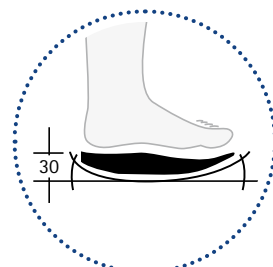

DRESDEN BREED

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	109	67	243	TS5411-35	TS5411-35/L	TS5411-35/R
36	110	68	247	TS5411-36	TS5411-36/L	TS5411-36/R
37	110	70	254	TS5411-37	TS5411-37/L	TS5411-37/R
38	112	70	259	TS5411-38	TS5411-38/L	TS5411-38/R
39	114	71	264	TS5411-39	TS5411-39/L	TS5411-39/R
40	114	71	270	TS5411-40	TS5411-40/L	TS5411-40/R
41	115	72	276	TS5411-41	TS5411-41/L	TS5411-41/R
42	115	73	283	TS5411-42	TS5411-42/L	TS5411-42/R
43	116	74	288	TS5411-43	TS5411-43/L	TS5411-43/R
44	117	75	295	TS5411-44	TS5411-44/L	TS5411-44/R
45	117	76	300	TS5411-45	TS5411-45/L	TS5411-45/R
46	118	78	308	TS5411-46	TS5411-46/L	TS5411-46/R
47	120	78	311	TS5411-47	TS5411-47/L	TS5411-47/R
48	122	80	317	TS5411-48	TS5411-48/L	TS5411-48/R

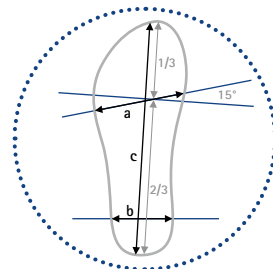

→ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



Productinformatie

INDICATIES

KASSEL is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

- | | |
|-------------------------|--|
| risicogroep III: | toestand na plantaire ulcus |
| graad 0: | toestand na een laesie |
| risicogroep VII: | acute laesie |
| graad 1: | oppervlakkige wond |
| graad 2: | wonden tot aan de pees/het kapsel, plantaire ulcera bij de voorvoet |
| graad 4: | begrensde necrose bij de voorvoet, toestand na teenamputatie |
| graad 4-5: | gedeeltelijke amputatie van de voorvoet, bijv. toestand na het verwijderen van enkele tenen bij behoud van het basisgewricht van de grote teen |

SCHOENUITVOERINGEN

De asymmetrische orthopedische schoen DIABETES KASSEL is in de breedtes STANDARD en BREED verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE

KASSEL heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelbalk en heel drop. De stijve zool verhindert een flexie van de teenbasisgewrichten en zorgt ervoor dat de voet van de patiënt(e) gestabiliseerd en geïmmobiliseerd wordt. Zo wordt een aanwezige wond optimaal ontlast en de wondgenezing zo goed mogelijk ondersteund.

BINNENZOLEN

De schoen wordt zonder binnenzool geleverd. Voor een succes van de behandeling op lange termijn moet de schoen met een aan diabetes aangepast voetbed worden gebruikt. Hiervoor kunt u het meegeleverde knippatroon als sjabloon gebruiken.

BIJZONDERHEDEN


KASSEL biedt met name in de variant BREED veel ruimte voor speciale eisen aan ruimte. Het stevige buitenmateriaal kan van het zachte binnenmateriaal worden losgemaakt om mogelijke drukplekken te ontlasten en de vorming van oedeem te voorkomen. Indien gewenst kan een beschermkap voor de voorvoet worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou.



KASSEL


KASSEL STANDARD

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	93	63	239	TS5421-35	TS5421-35/L	TS5421-35/R
36	94	63	243	TS5421-36	TS5421-36/L	TS5421-36/R
37	95	65	248	TS5421-37	TS5421-37/L	TS5421-37/R
38	96	66	256	TS5421-38	TS5421-38/L	TS5421-38/R
39	99	67	264	TS5421-39	TS5421-39/L	TS5421-39/R
40	102	69	268	TS5421-40	TS5421-40/L	TS5421-40/R
41	102	70	272	TS5421-41	TS5421-41/L	TS5421-41/R
42	104	70	278	TS5421-42	TS5421-42/L	TS5421-42/R
43	105	70	290	TS5421-43	TS5421-43/L	TS5421-43/R
44	108	72	293	TS5421-44	TS5421-44/L	TS5421-44/R
45	108	73	300	TS5421-45	TS5421-45/L	TS5421-45/R
46	110	73	306	TS5421-46	TS5421-46/L	TS5421-46/R
47	113	75	315	TS5421-47	TS5421-47/L	TS5421-47/R
48	113	77	316	TS5421-48	TS5421-48/L	TS5421-48/R

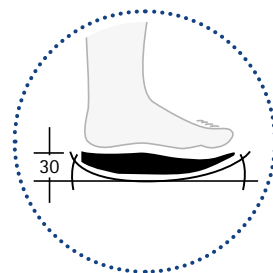

KASSEL BREED

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	109	67	243	TS5321-35	TS5321-35/L	TS5321-35/R
36	110	68	247	TS5321-36	TS5321-36/L	TS5321-36/R
37	110	70	254	TS5321-37	TS5321-37/L	TS5321-37/R
38	112	70	259	TS5321-38	TS5321-38/L	TS5321-38/R
39	114	71	264	TS5321-39	TS5321-39/L	TS5321-39/R
40	114	71	270	TS5321-40	TS5321-40/L	TS5321-40/R
41	115	72	276	TS5321-41	TS5321-41/L	TS5321-41/R
42	115	73	283	TS5321-42	TS5321-42/L	TS5321-42/R
43	116	74	288	TS5321-43	TS5321-43/L	TS5321-43/R
44	117	75	295	TS5321-44	TS5321-44/L	TS5321-44/R
45	117	76	300	TS5321-45	TS5321-45/L	TS5321-45/R
46	118	78	308	TS5321-46	TS5321-46/L	TS5321-46/R
47	120	78	311	TS5321-47	TS5321-47/L	TS5321-47/R
48	122	80	317	TS5321-48	TS5321-48/L	TS5321-48/R

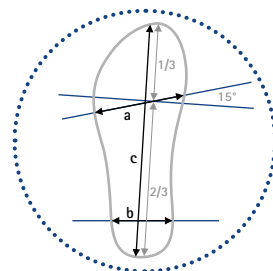

- ➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.
- ➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



Productinformatie

INDICATIES VOOR DIABETES

KONSTANZ is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

- risicogroep II:** diabetes mellitus met verlies van sensibiteit door PNP/relevant PAV
- graad 0: pre- en postulceratieve voet
- risicogroep III:** toestand na plantaire ulcus
- graad 0: toestand na een laesie, voet die risico loopt

INDICATIES VOOR HOMECARE

KONSTANZ is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden (bijv. door traumatisch letsel) of zwellingen (door overige indicaties) in de voet een open schoen met een flexibele zool en een aanpasbare binnenruimte nodig hebben.

ZOOLCONSTRUCTIE



KONSTANZ heeft een 30 mm dikke, flexibele zool met heel drop. Deze zoolconstructie ondersteunt een natuurlijke afwikkeling bij het lopen.

BINNENZOLEN

In de schoen bevinden zich drie 5 mm dikke EVA-binnenzolen (FO0053-XX), waarvan de bovenste binnenzool een antimicrobiële coating heeft. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** als tussenoplossing kunnen via deze binnenzolen drukontlastingen worden uitgevoerd tot ze worden vervangen door een aan diabetes aangepast voetbed.

BIJZONDERHEDEN

KONSTANZ is een lichte schoen die veel lucht en ruimte biedt. Vanwege het open ontwerp en met behulp van de comfortabele klittenbandsluitingen kan de schoen heel eenvoudig worden aan- en uitgetrokken.

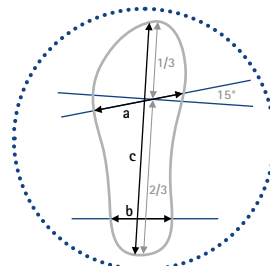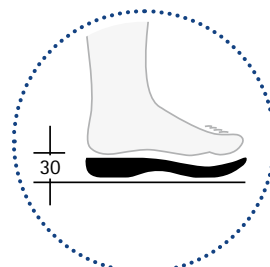

KONSTANZ

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	95	66	224	TH4562-35	TH4562-35/L	TH4562-35/R
36	96	67	228	TH4562-36	TH4562-36/L	TH4562-36/R
37	98	67	235	TH4562-37	TH4562-37/L	TH4562-37/R
38	100	69	240	TH4562-38	TH4562-38/L	TH4562-38/R
39	101	70	251	TH4562-39	TH4562-39/L	TH4562-39/R
40	102	70	255	TH4562-40	TH4562-40/L	TH4562-40/R
41	105	73	266	TH4562-41	TH4562-41/L	TH4562-41/R
42	107	74	272	TH4562-42	TH4562-42/L	TH4562-42/R
43	108	75	275	TH4562-43	TH4562-43/L	TH4562-43/R
44	109	75	285	TH4562-44	TH4562-44/L	TH4562-44/R
45	111	76	289	TH4562-45	TH4562-45/L	TH4562-45/R
46	112	80	300	TH4562-46	TH4562-46/L	TH4562-46/R
47	113	78	304	TH4562-47	TH4562-47/L	TH4562-47/R
48	114	79	307	TH4562-48	TH4562-48/L	TH4562-48/R
49	116	80	313	TH4562-49	TH4562-49/L	TH4562-49/R
50	118	81	320	TH4562-50	TH4562-50/L	TH4562-50/R

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



HMV-nr.: 31.03.03.4137





Productinformatie

INDICATIES VOOR DIABETES

HEIDELBERG is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

- risicogroep II:** diabetes mellitus met verlies van sensibiteit door PNP/relevant PAV
- graad 0: pre- en postulceratieve voet
- risicogroep III:** toestand na plantaire ulcus
- graad 0: toestand na een laesie, voet die risico loopt

INDICATIES VOOR HOMECARE

HEIDELBERG is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden (bijv. door traumatisch letsel) of zwellingen (door overige indicaties) in de voet een gesloten schoen met een flexibele zool en een aanpasbare binnenruimte nodig hebben.

ZOOLCONSTRUCTIE



HEIDELBERG heeft een 30 mm dikke, flexibele zool met heel drop. Deze zoolconstructie ondersteunt een natuurlijke afwikkeling bij het lopen.

BINNENZOLEN

In de schoen bevinden zich drie 5 mm dikke EVA-binnenzolen (F00053-XX), waarvan de bovenste binnenzool een antimicrobiële coating heeft. **Voor orthopedische schoenen DIABETES:** als tussenoplossing kunnen via deze binnenzolen drukontlastingen worden uitgevoerd tot ze worden vervangen door een aan diabetes aangepast voetbed.

BIJZONDERHEDEN

HEIDELBERG biedt een variabel volume. Het gedeeltelijk flexibele bovenmateriaal van de schoen kan aan de verschillende eisen voor ruimte (bijv. door wisselende of dikke verbanden) worden aangepast.

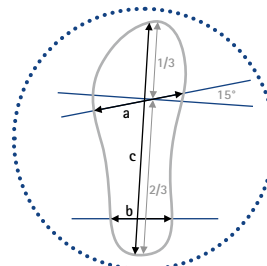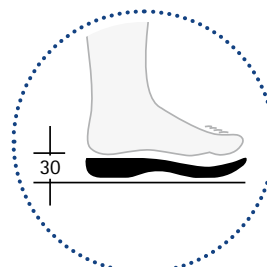

HEIDELBERG

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	95	66	224	TS4552-35	TS4552-35/L	TS4552-35/R
36	96	67	233	TS4552-36	TS4552-36/L	TS4552-36/R
37	98	68	238	TS4552-37	TS4552-37/L	TS4552-37/R
38	100	69	246	TS4552-38	TS4552-38/L	TS4552-38/R
39	101	70	251	TS4552-39	TS4552-39/L	TS4552-39/R
40	102	71	257	TS4552-40	TS4552-40/L	TS4552-40/R
41	105	73	262	TS4552-41	TS4552-41/L	TS4552-41/R
42	107	74	272	TS4552-42	TS4552-42/L	TS4552-42/R
43	108	75	275	TS4552-43	TS4552-43/L	TS4552-43/R
44	109	75	284	TS4552-44	TS4552-44/L	TS4552-44/R
45	111	76	292	TS4552-45	TS4552-45/L	TS4552-45/R
46	112	76	299	TS4552-46	TS4552-46/L	TS4552-46/R
47	113	78	300	TS4552-47	TS4552-47/L	TS4552-47/R
48	114	79	310	TS4552-48	TS4552-48/L	TS4552-48/R
49	116	80	315	TS4552-49	TS4552-49/L	TS4552-49/R
50	118	81	322	TS4552-50	TS4552-50/L	TS4552-50/R

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



HEIDELBERG

HMV-nr.: 31.03.03.4051





Productinformatie

INDICATIES

NÜRNBERG is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van de diabetische voet:

risicogroep III: toestand na plantaire ulcus
graad 0: toestand na een laesie (voet die risico loopt)

SCHOENUITVOERINGEN

De asymmetrische orthopedische schoen DIABETES NÜRNBERG is in de breedtes STANDARD en BREED verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE

NÜRNBERG heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelbalk en heel drop. De stijve zool verhindert een flexie van de teenbasisgewrichten en zorgt ervoor dat de voet van de patiënt(e) gestabiliseerd en geïmmobiliseerd wordt. Zo wordt een aanwezige wond optimaal ontlast en de wondgenezing zo goed mogelijk ondersteund.

BINNENZOLEN

De schoen wordt zonder binnenzool geleverd. Voor een succes van de behandeling op lange termijn moet de schoen met een aan diabetes aangepast voetbed worden gebruikt. Hiervoor kunt u het meegeleverde knippatroon als sjabloon gebruiken.


BIJZONDERHEDEN

NÜRNBERG biedt met name in de variant BREED veel ruimte voor speciale eisen aan ruimte. Bovendien kan het stevige buitenmateriaal van het zachte binnenmateriaal worden losgemaakt om mogelijke drukplekken te ontlasten en de vorming van oedeem te voorkomen.




NÜRNBERG STANDARD

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	93	63	239	TS4311-35	TS4311-35/L	TS4311-35/R
36	94	63	243	TS4311-36	TS4311-36/L	TS4311-36/R
37	95	65	248	TS4311-37	TS4311-37/L	TS4311-37/R
38	96	66	256	TS4311-38	TS4311-38/L	TS4311-38/R
39	99	67	264	TS4311-39	TS4311-39/L	TS4311-39/R
40	102	69	268	TS4311-40	TS4311-40/L	TS4311-40/R
41	102	70	272	TS4311-41	TS4311-41/L	TS4311-41/R
42	104	70	278	TS4311-42	TS4311-42/L	TS4311-42/R
43	105	70	290	TS4311-43	TS4311-43/L	TS4311-43/R
44	108	72	293	TS4311-44	TS4311-44/L	TS4311-44/R
45	108	73	300	TS4311-45	TS4311-45/L	TS4311-45/R
46	110	73	306	TS4311-46	TS4311-46/L	TS4311-46/R
47	113	75	315	TS4311-47	TS4311-47/L	TS4311-47/R
48	113	77	316	TS4311-48	TS4311-48/L	TS4311-48/R

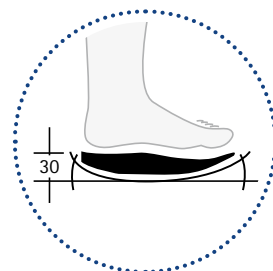

NÜRNBERG BREED

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen [mm]			Art.-nr. paar	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c			
35	109	67	243	TS4411-35	TS4411-35/L	TS4411-35/R
36	110	68	247	TS4411-36	TS4411-36/L	TS4411-36/R
37	110	70	254	TS4411-37	TS4411-37/L	TS4411-37/R
38	112	70	259	TS4411-38	TS4411-38/L	TS4411-38/R
39	114	71	264	TS4411-39	TS4411-39/L	TS4411-39/R
40	114	71	270	TS4411-40	TS4411-40/L	TS4411-40/R
41	115	72	276	TS4411-41	TS4411-41/L	TS4411-41/R
42	115	73	283	TS4411-42	TS4411-42/L	TS4411-42/R
43	116	74	288	TS4411-43	TS4411-43/L	TS4411-43/R
44	117	75	295	TS4411-44	TS4411-44/L	TS4411-44/R
45	117	76	300	TS4411-45	TS4411-45/L	TS4411-45/R
46	118	78	308	TS4411-46	TS4411-46/L	TS4411-46/R
47	120	78	311	TS4411-47	TS4411-47/L	TS4411-47/R
48	122	80	317	TS4411-48	TS4411-48/L	TS4411-48/R

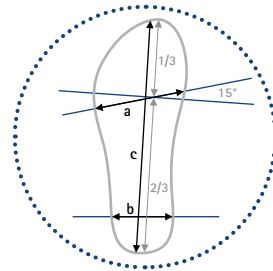

→ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



HMV-nr.: 31.03.03.4033

Productinformatie

INDICATIES

BREMEN is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden aan de voet/bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel), zwellingen in de voet (bijv. door ontstekingen) of postoperatief na overig letsel een gesloten schoen met een ruime sluitingstechniek nodig hebben.

SCHOENUITVOERING

De verbandschoen BREMEN is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



BREMEN heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelpalk en heel drop.

BINNENZOLEN

In de schoen bevindt zich een EVA-binnenzool (FO0064-XX) die een antimicrobiële coating heeft.

BIJZONDERHEDEN

BREMEN biedt veel ruimte voor verbanden in verschillende diktes en kan met behulp van de ruime gespsluiting comfortabel worden aan- en uitgetrokken.

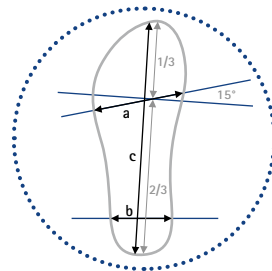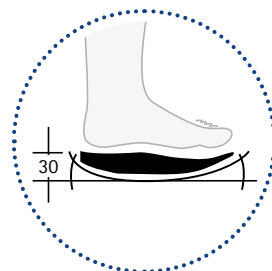

BREMEN

Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
		a	b	c					a	b	c	
XXS	32-33	89	66	218	TS1151-XXS		L	40-41	103	83	285	TS1151-L
XS	34-35	90	66	230	TS1151-XS		XL	42-43	109	85	299	TS1151-XL
S	36-37	96	77	257	TS1151-S		XXL	44-46	110	87	312	TS1151-XXL
M	38-39	100	79	275	TS1151-M							

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



HMV-nr.: 31.03.03.4141



Productinformatie

INDICATIES

MADRID is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden aan de voet/bij de voorvoet onder de voet-zool (bijv. door traumatisch letsel), zwellingen in de voet (bijv. door ontstekingen) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenten) of ander letsel een schoen nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De verbandschoen MADRID is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



MADRID heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelpalk en heel drop.

BINNENZOLEN

De schoen wordt geleverd met een enkelvoudige, 10 mm dikke binnenzool van EVA-materiaal.

BIJZONDERHEDEN

MADRID biedt een open teengedeelte en kan met behulp van de twee lange klittenbandsluitingen aan verschillende behoeften worden aangepast.

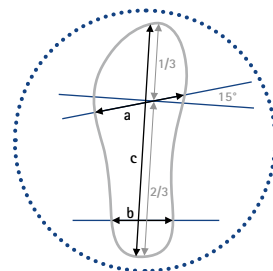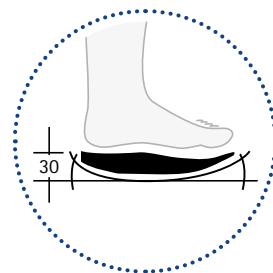

MADRID

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c	
XXS 33-34	83	64	205	TS1000-XXS
XS 35-36	90	71	225	TS1000-XS
S 37-38	92	75	240	TS1000-S
M 39-40	97	80	261	TS1000-M

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c	
L 41-42	102	83	281	TS1000-L
XL 43-44	108	88	301	TS1000-XL
XXL 45-47	113	93	319	TS1000-XXL

→ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



HMV-nr.: 31.03.03.4031

Productinformatie

INDICATIES

STUTTGART is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden aan de voet/bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel), zwellingen in de voet (bijv. door ontstekingen) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenen) of ander letsel een schoen nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De verbandschoen STUTTGART is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



STUTTGART heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelpalk en heel drop.

BINNENZOLEN

In de schoen bevindt zich een EVA-binnenzool (FO0063-XX) die een antimicrobiële coating heeft.

BIJZONDERHEDEN

STUTTGART biedt een open teengedeelte en kan met behulp van de drie lange klittenbandsluitingen aan verschillende behoeften worden aangepast.

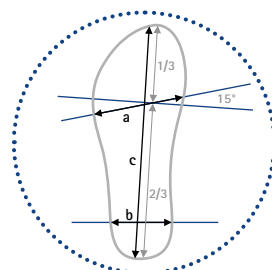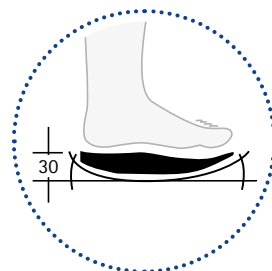

STUTTGART

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk	Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c			a	b	c	
XXS 33-34	85	71	226	TS1111-XXS	L 41-42	97	76	285	TS1111-L
XS 35-36	85	71	241	TS1111-XS	XL 43-44	105	81	297	TS1111-XL
S 37-38	93	71	255	TS1111-S	XXL 45-47	109	83	313	TS1111-XXL
M 39-40	95	74	273	TS1111-M					

→ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



AMSTERDAM

HMV-nr.: 31.03.03.4037

Productinformatie

INDICATIES

AMSTERDAM is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden aan de voet/bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel), zwellingen in de voet (bijv. door ontstekingen) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenten) of ander letsel een schoen met een hoge schacht nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De verbandschoen AMSTERDAM is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen. AMSTERDAM is ook in een KIDS-versie verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE

AMSTERDAM heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een rechte bovenkant en afwikkelpalk.



BINNENZOLEN

De schoen wordt geleverd met een enkelvoudige, 10 mm dikke binnenzool van EVA-materiaal.

BIJZONDERHEDEN

AMSTERDAM biedt een open teengedeelte met riem waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast. Bovendien is AMSTERDAM een geschikte TWINSHOE en zodoende een hoogtecompensatie voor de ontlastende schoenen LONDON en MAILAND.

KIDS

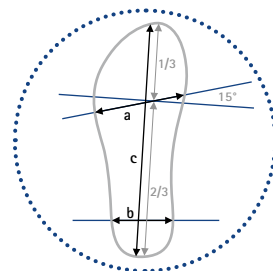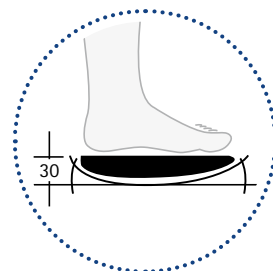

AMSTERDAM

Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk			Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
		a	b	c						a	b	c	
XSK	31-33	86	63	221	TS6100-XSK			L	40-42	103	73	276	TS6100-L
XS	31-33	86	60	220	TS6100-XS			XL	43-45	111	77	300	TS6100-XL
S	34-36	92	65	239	TS6100-S			XXL	46-48	116	80	317	TS6100-XXL
M	37-39	96	69	256	TS6100-M								

KIDS

- ➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.
- ➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



FREIBURG

HMV-nr.: 31.03.03.4015

Productinformatie

INDICATIES

FREIBURG is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden aan de voet/bij de voorvoet onder de voet-zool (bijv. door traumatisch letsel), zwellingen in de voet (bijv. door ontstekingen) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenen) of ander letsel een schoen met een hoge schacht nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De verbandschoen FREIBURG is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



FREIBURG heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een rechte bovenkant en afwikkelpalk.

BINNENZOLEN

In de schoen bevindt zich een EVA-binnenzool (FO0060-XX) die een antimicrobiële coating heeft.

BIJZONDERHEDEN

FREIBURG biedt een open teengedeelte met riem waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast. Bovendien is FREIBURG een geschikte TWINSHOE en zodoende een hoogtecompensatie voor de ontlastende schoen HANNOVER.

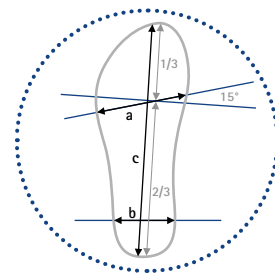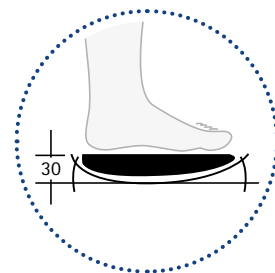

FREIBURG

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c				a	b	c	
XS 31-33	86	64	220	TS6101-XS		L 40-42	103	75	282	TS6101-L
S 34-36	95	70	240	TS6101-S		XL 43-45	107	76	301	TS6101-XL
M 37-39	97	73	262	TS6101-M		XXL 46-48	122	83	323	TS6101-XXL

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



REGENSBURG

HMV-nr.: 31.03.03.4035

Productinformatie

INDICATIES

REGENSBURG is bij uitstek geschikt voor patiënten die postoperatief na een spronggewrichtfractuur een individueel aanpasbare schoen met hoge schacht nodig hebben die geschikt is voor een externe fixateur.

SCHOENUITVOERING

De verbandschoen REGENSBURG is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE





REGENSBURG heeft een 30 mm dikke zool met een rechte bovenkant en afwikkelpalk.

BINNENZOLEN

In de schoen bevindt zich een EVA-binnenzool (F00060-XX) die een antimicrobiële coating heeft.

BIJZONDERHEDEN

REGENSBURG biedt rond de enkel extra naden, zodat het materiaal op deze plekken netjes op maat kan worden gemaakt om indien gewenst (bijv. voor een externe fixateur) nog meer vrije ruimte te creëren.

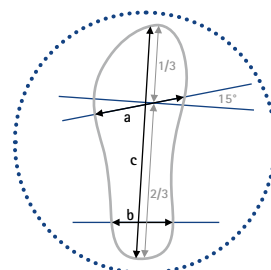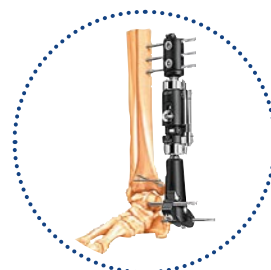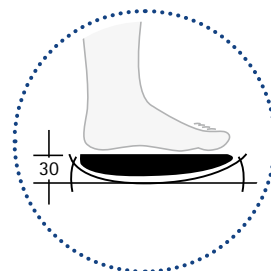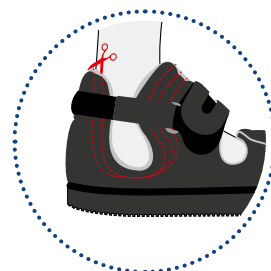

REGENSBURG

Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
		a	b	c					a	b	c	
XS	31-33	86	60	220	TS6141-XS		L	40-42	100	72	284	TS6141-L
S	34-36	92	67	240	TS6141-S		XL	43-45	105	75	300	TS6141-XL
M	37-39	99	71	260	TS6141-M		XXL	46-48	120	82	324	TS6141-XXL

→ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



Productinformatie

INDICATIES

KOPENHAGEN is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenen) of ander letsel een schoen met een hoge schacht en dikke zool nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De voorvoet ontlastende schoen KOPENHAGEN is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



KOPENHAGEN heeft een 40 mm dikke, stijve zool met een rechte bovenkant en extra grote afwikkelpalk.

BINNENZOLEN

De schoen wordt geleverd met een enkelvoudige, 10 mm dikke binnenzool van EVA-materiaal.

BIJZONDERHEDEN

KOPENHAGEN biedt een open teengedeelte met riem waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast.

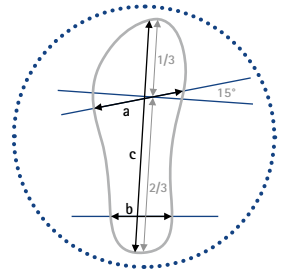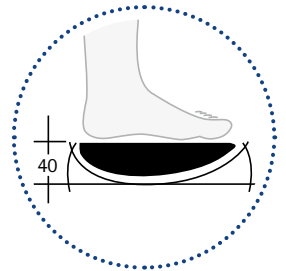

KOPENHAGEN

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c				a	b	c	
XS	31-33	86	63	220	F07100-XS	L	40-42	103	73	275
S	34-36	91	66	239	F07100-S	XL	43-45	111	77	297
M	37-39	98	67	258	F07100-M	XXL	46-48	116	79	316
										F07100-L
										F07100-XL
										F07100-XXL

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



Productinformatie

INDICATIES

LONDON is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenten) of ander letsel een schoen met een hoge schacht nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De voorvoet ontlastende schoen LONDON is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



LONDON heeft een 30 mm dikke, stijve 8° wigvormige zool (60:40) met afwikkelpalk. Door de wigvormige zool wordt de afwijking van de voet veranderd en de plantaire druk bij de voorvoet sterk verminderd.

BINNENZOLEN

De schoen wordt geleverd met een enkelvoudige, 10 mm dikke binnenzool van EVA-materiaal.

BIJZONDERHEDEN

LONDON biedt een open teengedeelte met riem waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast. Bovendien kan AMSTERDAM als TWINSHOE en zodoende hoogtecompensatie bij LONDON worden gedragen.

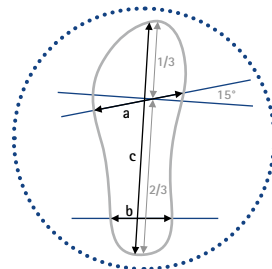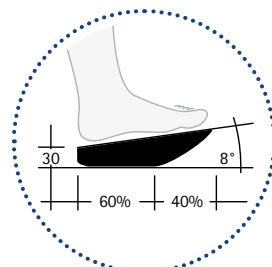

LONDON

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c				a	b	c	
XS 31-33	88	63	224	F01600-XS		L 40-42	103	74	275	F01600-L
S 34-36	92	67	239	F01600-S		XL 43-45	111	77	297	F01600-XL
M 37-39	98	67	258	F01600-M		XXL 46-48	120	80	316	F01600-XXL

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



HMV-nr.: 31.03.03.5019

Productinformatie

INDICATIES

HANNOVER is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenten) of ander letsel een schoen met een hoge schacht en voorvoetondersteuning nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De voorvoet ontlastende schoen HANNOVER is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen. HANNOVER is ook in een KIDS-versie verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE



HANNOVER heeft een 30 mm dikke, stijve 8° wigvormige zool (60:40) met voorvoetondersteuning die de afwijking van de voet verandert en de voorvoet ontlast. Als de zool wordt bewerkt, kan de afrollijn worden verplaatst.

BINNENZOLEN

In de schoen bevindt zich een EVA-binnenzool (FO0060-XX) die een antimicrobiële coating heeft.

BIJZONDERHEDEN

HANNOVER biedt een open teengedeelte met riem waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast. Bovendien kan FREIBURG als TWINSHOE en zodoende hoogtec compensatie bij HANNOVER worden gedragen.

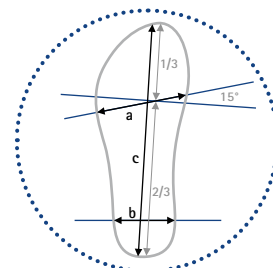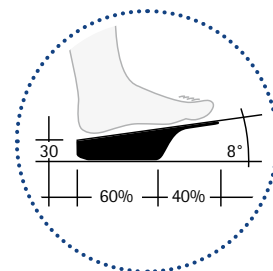

HANNOVER

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c				a	b	c	
XS 31-33	83	61	222	FO1101-XS		L 40-42	103	75	282	FO1101-L
S 34-36	92	70	245	FO1101-S		XL 43-45	105	76	298	FO1101-XL
M 37-39	101	71	256	FO1101-M		XXL 46-48	118	83	325	FO1101-XXL

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



Productinformatie

INDICATIES

MAILAND is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenten) of ander letsel een schoen met een hoge schacht en voorvoetondersteuning nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De voorvoet ontlastende schoen MAILAND is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen. MAILAND is ook in een KIDS-versie verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE

MAILAND heeft een 30 mm dikke, stijve 8° wigvormige zool (60:40) met voorvoetondersteuning die de afwijking van de voet verandert en de voorvoet ontlast. Als de zool wordt bewerkt, kan de afrollijn worden verplaatst.



BINNENZOLEN

De schoen wordt geleverd met een enkelvoudige, 10 mm dikke binnenzool van EVA-materiaal.

BIJZONDERHEDEN

MAILAND biedt een open teengedeelte met riem waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast. Bovendien kan AMSTERDAM als TWINSHOE en zodoende hoogtecompensatie bij MAILAND worden gedragen.

KIDS

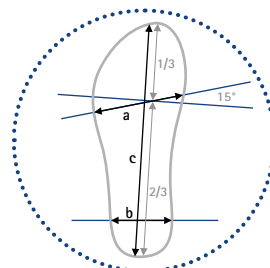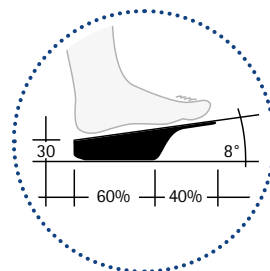


MAILAND

Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk			Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
		a	b	c						a	b	c	
XSK	31-33	88	64	220	F01100-XSK			L	40-42	103	72	275	F01100-L
XS	31-33	89	62	223	F01100-XS			XL	43-45	111	77	298	F01100-XL
S	34-36	93	66	237	F01100-S			XXL	46-48	116	79	320	F01100-XXL
M	37-39	95	68	261	F01100-M								

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.

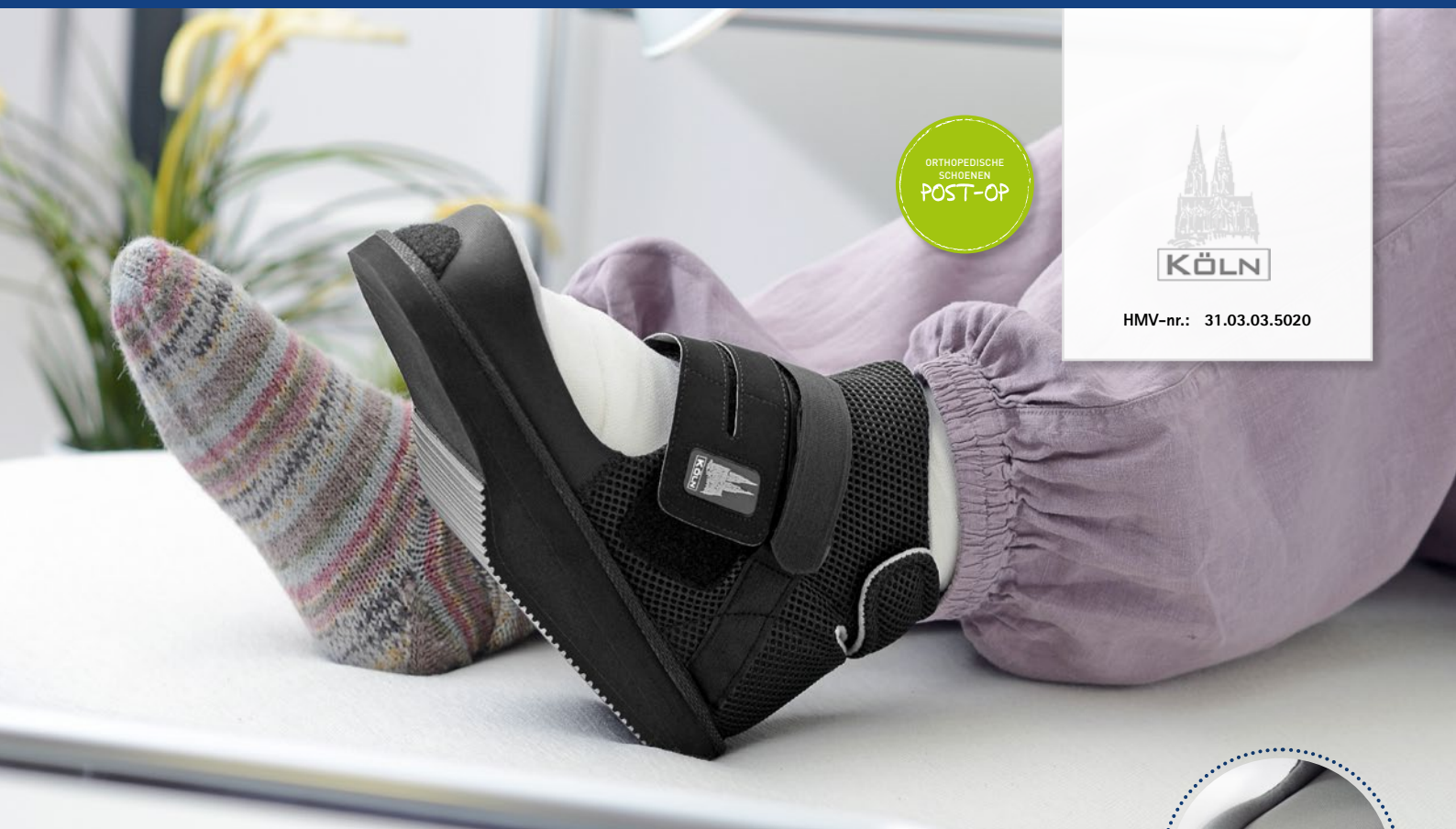

Productinformatie

INDICATIES

KÖLN is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of (postoperatief) na overig letsel een schoen met een hoge schacht en voorvoetondersteuning nodig hebben die bij de voorvoet open is.

SCHOENUITVOERING

De voorvoet ontlastende schoen KÖLN is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



KÖLN heeft een 30 mm dikke, stijve 8° wigvormige zool (60:40) met voorvoetondersteuning die de afwijking van de voet verandert en de voorvoet ontlast. Als de zool wordt bewerkt, kan de afrollijn worden verplaatst.

BINNENZOLEN

In de schoen bevindt zich een EVA-binnenzool (FO0062-XX) die een antimicrobiële coating heeft.

BIJZONDERHEDEN

KÖLN biedt een open voorvoetgedeelte met een lage rondlopende rand waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast.

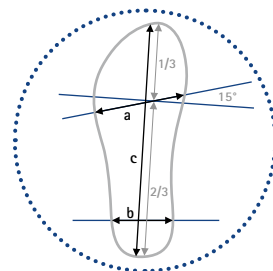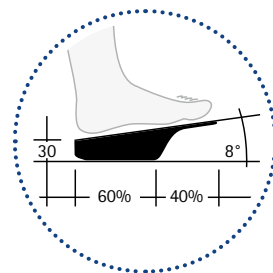

KÖLN

Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
		a	b	c					a	b	c	
XS	30-32	87	59	216	F01121-XS		L	39-41	101	75	275	F01121-L
S	33-35	92	65	236	F01121-S		XL	42-44	110	80	296	F01121-XL
M	36-38	100	71	255	F01121-M		XXL	45-47	110	80	317	F01121-XXL

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



STOCKHOLM

HMF-nr.: 31.03.03.5050

Productinformatie

INDICATIES

STOCKHOLM is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of (postoperatief) na overig letsel een schoen met een hoge schacht en voorvoetondersteuning nodig hebben die bij de voorvoet open is.

SCHOENUITVOERING

De voorvoet ontlastende schoen STOCKHOLM is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



STOCKHOLM heeft een 30 mm dikke, stijve 8° wigvormige zool (60:40) met voorvoetondersteuning die de afwijking van de voet verandert en de voorvoet ontlast. Als de zool wordt bewerkt, kan de afrollijn worden verplaatst.

BINNENZOLEN

De schoen wordt geleverd met een enkelvoudige, 10 mm dikke binnenzool van EVA-materiaal.

BIJZONDERHEDEN

STOCKHOLM biedt een open voorvoetgedeelte met een lage rondlopende rand waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast.

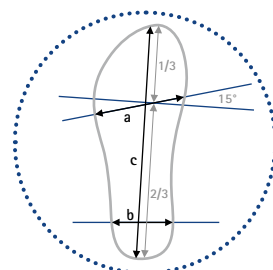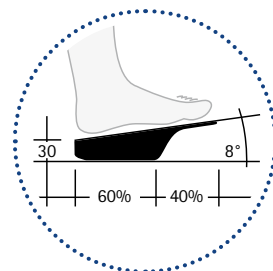

STOCKHOLM

Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
		a	b	c					a	b	c	
XS	30-32	85	60	218	F01120-XS		L	39-41	100	72	274	F01120-L
S	33-35	86	64	235	F01120-S		XL	42-44	110	76	297	F01120-XL
M	36-38	95	67	256	F01120-M		XXL	45-47	117	78	319	F01120-XXL

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



Productinformatie

INDICATIES

STENDAL is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of postoperatief na een corrigerende osteotomie bij de voorvoet (bijv. hallux valgus, hamer- of klauwtenen) of ander letsel een schoen met een hoge schacht en voorvoetondersteuning nodig hebben die bij de tenen open is.

SCHOENUITVOERING

De voorvoet ontlastende schoen STENDAL is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



STENDAL heeft een 30 mm dikke, stijve 10° wigvormige zool (50:50) met voorvoetondersteuning die de afwijking van de voet verandert en de voorvoet ontlast. Als de zool wordt bewerkt, kan de afrollijn worden verplaatst.

BINNENZOLEN

De schoen wordt geleverd met een enkelvoudige, 10 mm dikke binnenzool van EVA-materiaal.

BIJZONDERHEDEN

STENDAL biedt een open teengedeelte met riem waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Met de praktische klittenbandsluiting in het hielgedeelte kan de schachtbreedte worden aangepast.

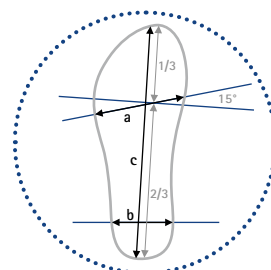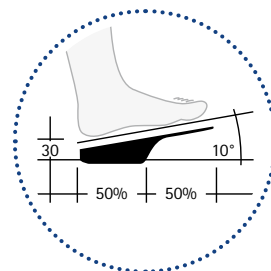

STENDAL

Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat		Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
		a	b	c					a	b	c	
XS	31-33	88	61	221	F01160-XS		L	40-42	103	72	275	F01160-L
S	34-36	92	67	241	F01160-S		XL	43-45	110	75	295	F01160-XL
M	37-39	97	68	261	F01160-M		XXL	46-48	118	77	320	F01160-XXL

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.





Productinformatie

INDICATIES

BERLIN is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de voorvoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of postoperatief na een (gedeeltelijke) amputatie van de voorvoet/ander letsel bij de voorvoet een schoen met een verkorte, dikke zool met hoge schacht zonder voorvoetondersteuning en bij het schoenmodel met beschermbeugel toch een extra stootbescherming nodig hebben.

SCHOENUITVOERING

De voorvoet ontlastende schoen BERLIN is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



BERLIN heeft een 40 mm dikke, stijve 10° wigvormige zool (50:50) zonder voorvoetondersteuning. Door de verkorte zool wordt de afwikkeling van de voet veranderd en de voorvoet volledig ontlast.

BINNENZOLEN

In de schoen bevindt zich een EVA-binnenzool (FO0011-XX) met een zacht oppervlak.

BIJZONDERHEDEN

BERLIN biedt een verkorte wigvormige zool en zorgt zo voor een volledige drukontlasting van de voorvoet. BERLIN met beschermbeugel biedt extra bescherming tegen letsel (bijv. stoten). De beschermbeugel kan zowel in lengte versteld als thermoplastisch vervormd worden en kan dus individueel worden aangepast. Indien gewenst kan aan de binnenzool een beschermkap voor de voorvoet worden aangebracht die beschermt tegen natheid en kou. Bovendien kan BERLIN ook achteraf worden voorzien van een beschermbeugel (FO1000-Z5,-Z6,-Z7,-Z8).

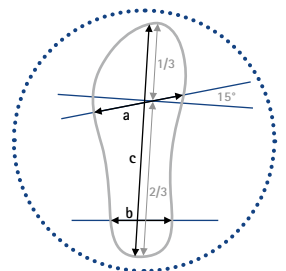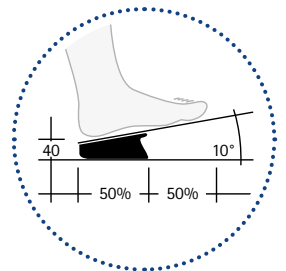

BERLIN

Schoenmaat	Binnenmaat van de schoen		Art.-nr. per stuk
	b	c	
S 36-38	66	160	FO1002-S
M 39-42	70	170	FO1002-M
L 43-46	72	187	FO1002-L
XL 47-51	77	195	FO1002-XL

BERLIN met beschermbeugel

Schoenmaat	Binnenmaat van de schoen		Art.-nr. per stuk
	b	c	
S 36-38	66	160	FO1012-S
M 39-42	70	170	FO1012-M
L 43-46	72	187	FO1012-L
XL 47-51	77	195	FO1012-XL



WETZLAR

Productinformatie

INDICATIES

WETZLAR is bij uitstek geschikt voor de volgende risicogroepen en wondstadia van een diabetische voet:

- risicogroep VII:** acute laesie
 graad 1: oppervlakkige wond
 graad 2: wonden tot aan de pees/het kapsel, plantaire ulcera bij de hiel

SCHOENUITVOERINGEN

De asymmetrische orthopedische schoen DIABETES WETZLAR is als linker- of rechterschoen verkrijgbaar.

ZOOLCONSTRUCTIE



WETZLAR heeft een 30 mm dikke, stijve zool met een extra grote afwikkelpalk en heel drop. De stijve zool verhindert een flexie van de teenbasisgewrichten en zorgt ervoor dat de voet van de patiënt(e) gestabiliseerd en geïmmobiliseerd wordt. Zo wordt een aanwezige wond optimaal ontlast en de wondgenezing zo goed mogelijk ondersteund.

BINNENZOLEN

De schoen wordt zonder binnenzool geleverd. Voor een succes van de behandeling op lange termijn moet de schoen met een aan diabetes aangepast voetbed worden gebruikt. Hiervoor kunt u het meegeleverde knippatroon als sjabloon gebruiken.

BIJZONDERHEDEN

WETZLAR biedt een open achtervoetgedeelte waaraan een beschermkap voor de achtervoet (F09543-XX) kan worden aangebracht die wordt meegeleverd. In het hielgedeelte heeft de schoen geen vaste binnenzool waardoor de zool direct van binnen kan worden bewerkt. De lage rondlopende rand houdt een achteraf ingevoegde binnenzool/voetbed slipvast op zijn plek en heeft extra naden, waardoor het materiaal bij een noodzakelijke drukontlasting netjes op maat kan worden gemaakt.

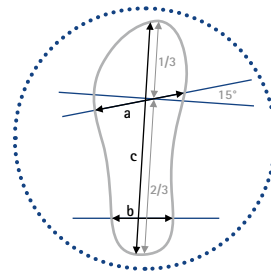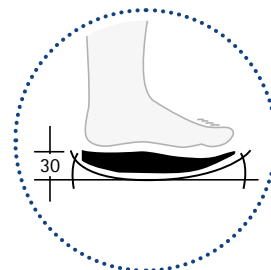

WETZLAR

Schoenmaat	Binnenmaat van de schoen			Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen	Schoenmaat	Binnenmaat van de schoen			Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen
	a	b	c				a	b	c		
35	105	67	243	TS5431-35/L	TS5431-35/R	42	119	74	286	TS5431-42/L	TS5431-42/R
36	107	69	244	TS5431-36/L	TS5431-36/R	43	120	75	289	TS5431-43/L	TS5431-43/R
37	109	71	251	TS5431-37/L	TS5431-37/R	44	122	77	295	TS5431-44/L	TS5431-44/R
38	112	72	256	TS5431-38/L	TS5431-38/R	45	123	77	295	TS5431-45/L	TS5431-45/R
39	115	72	260	TS5431-39/L	TS5431-39/R	46	125	80	310	TS5431-46/L	TS5431-46/R
40	116	74	265	TS5431-40/L	TS5431-40/R	47	126	80	311	TS5431-47/L	TS5431-47/R
41	117	74	270	TS5431-41/L	TS5431-41/R	48	128	83	315	TS5431-48/L	TS5431-48/R

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de achtervoet vindt u vanaf cataloguspagina 58.



HMV-nr.: 31.03.03.5021



Productinformatie

INDICATIES

MÜNCHEN is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de achtervoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of postoperatief na overig letsel bij de achtervoet (bijv. hielspoor) een schoen met een verkorte zool, hoge schacht en zonder achtervoetondersteuning nodig hebben.

SCHOENUITVOERING

De achtervoet ontlastende schoen MÜNCHEN is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



MÜNCHEN heeft een 30 mm dikke, in het voorvoetgedeelte gedeeltelijk flexibele 5° wigvormige zool (20:80) zonder achtervoetondersteuning. Door de achter verkorte zool wordt de afwikkeling van de voet veranderd en de achtervoet volledig ontlast.

BINNENZOLEN

In de schoen bevindt zich een EVA-binnenzool (F00020-XX) met een zacht oppervlak.

BIJZONDERHEDEN

MÜNCHEN biedt een open voorvoetgedeelte met een lage rondlopende rand waaraan indien gewenst een beschermkap voor de voorvoet kan worden aangebracht, en een open achtervoetgedeelte waaraan indien gewenst een beschermkap voor de achtervoet kan worden aangebracht.

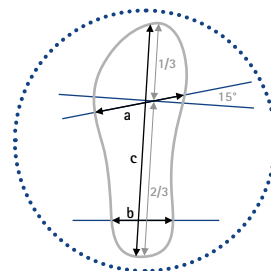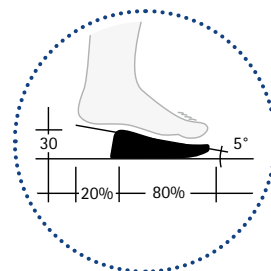

MÜNCHEN

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c				a	b	c	
S 35-37	90	66	244	F02121-S		L 41-42	103	71	280	F02121-L
M 38-40	100	70	265	F02121-M		XL 43-46	105	79	297	F02121-XL

➔ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.

➔ Beschermkappen voor de voorvoet en achtervoet vindt u vanaf cataloguspagina 56.



ORTHOPEDISCHE
SCHOENEN
POST-OP



Productinformatie

INDICATIES

WUPPERTAL is bij uitstek geschikt voor patiënten die vanwege wonden bij de achtervoet onder de voetzool (bijv. door traumatisch letsel) of postoperatief na overig letsel bij de achtervoet (bijv. hielspoor) een schoen met een verkorte zool, hoge schacht en zonder achtervoetondersteuning nodig hebben.

SCHOENUITVOERING

De achtervoet ontlastende schoen WUPPERTAL is symmetrisch en kan zowel links als rechts worden gedragen.

ZOOLCONSTRUCTIE



WUPPERTAL heeft een 30 mm dikke, in het voorvoetgedeelte gedeeltelijk flexibele 5° wigvormige zool (20:80) zonder achtervoetondersteuning. Door de achter verkorte zool wordt de afwikkeling van de voet veranderd en de achtervoet volledig ontlast.

BINNENZOLEN

De schoen wordt geleverd met een enkelvoudige binnenzool van EVA-materiaal.

BIJZONDERHEDEN

WUPPERTAL biedt een open teen- en hielgedeelte en kan met behulp van de bijzondere klittenbandsluitingen aan verschillende behoeften worden aangepast.

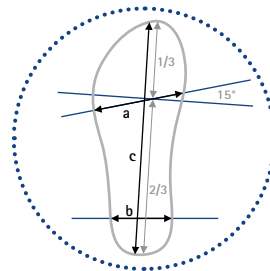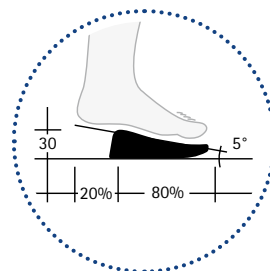

WUPPERTAL

Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk		Schoenmaat	Binnenmaten van de schoen			Art.-nr. per stuk
	a	b	c				a	b	c	
S	35-37	85	73	214	F02000-S	L	41-42	94	81	251
M	38-40	90	73	235	F02000-M	XL	43-46	98	85	271
										F02000-L
										F02000-XL

→ Binnenzolen vindt u vanaf cataloguspagina 48.



De bovenste binnenzool is antimicrobieel.
De binnenzolen zijn gemaakt van EVA-materiaal
en bieden verschillende Shore-hardheden:
grijs = 46°
wit = 23°
antimicrobieel = 28°

Set binnenzolen STANDARD

Schoenmaat	Art.-nr. linkerset	Art.-nr. rechterset
35	F00053-35/L	F00053-35/R
36	F00053-36/L	F00053-36/R
37	F00053-37/L	F00053-37/R
38	F00053-38/L	F00053-38/R
39	F00053-39/L	F00053-39/R
40	F00053-40/L	F00053-40/R
41	F00053-41/L	F00053-41/R
42	F00053-42/L	F00053-42/R
43	F00053-43/L	F00053-43/R
44	F00053-44/L	F00053-44/R
45	F00053-45/L	F00053-45/R
46	F00053-46/L	F00053-46/R
47	F00053-47/L	F00053-47/R
48	F00053-48/L	F00053-48/R
49	F00053-49/L	F00053-49/R
50	F00053-50/L	F00053-50/R

AUGSBURG STANDARD, ERFURT STANDARD,
FLENSBURG STANDARD, HEIDELBERG, KONSTANZ,
LEIPZIG

Set binnenzolen BREED

Schoenmaat	Art.-nr. linkerset	Art.-nr. rechterset
35	F00054-35/L	F00054-35/R
36	F00054-36/L	F00054-36/R
37	F00054-37/L	F00054-37/R
38	F00054-38/L	F00054-38/R
39	F00054-39/L	F00054-39/R
40	F00054-40/L	F00054-40/R
41	F00054-41/L	F00054-41/R
42	F00054-42/L	F00054-42/R
43	F00054-43/L	F00054-43/R
44	F00054-44/L	F00054-44/R
45	F00054-45/L	F00054-45/R
46	F00054-46/L	F00054-46/R
47	F00054-47/L	F00054-47/R
48	F00054-48/L	F00054-48/R
49	F00054-49/L	F00054-49/R
50	F00054-50/L	F00054-50/R

AUGSBURG BREED, ERFURT BREED, FLENSBURG BREED,
LEIPZIG



De binnenzolen zijn gemaakt van EVA-materiaal en bieden verschillende Shore-hardheden:

zwart = 40°

grijs = 25°

wit = 50°

Set binnenzolen STANDARD

Schoenmaat	Art.-nr. set	Schoenmaat	Art.-nr. set
35	F00033-35	43	F00033-43
36	F00033-36	44	F00033-44
37	F00033-37	45	F00033-45
38	F00033-38	46	F00033-46
39	F00033-39	47	F00033-47
40	F00033-40	48	F00033-48
41	F00033-41	49	F00033-49
42	F00033-42	50	F00033-50

AUGSBURG STANDARD, ERFURT STANDARD, FLENSBURG STANDARD, HEIDELBERG, KONSTANZ, LEIPZIG

Set binnenzolen BREED

Schoenmaat	Art.-nr. set	Schoenmaat	Art.-nr. set
35	F00034-35	43	F00034-43
36	F00034-36	44	F00034-44
37	F00034-37	45	F00034-45
38	F00034-38	46	F00034-46
39	F00034-39	47	F00034-47
40	F00034-40	48	F00034-48
41	F00034-41	49	F00034-49
42	F00034-42	50	F00034-50

AUGSBURG BREED, FLENSBURG BREED, ERFURT STANDARD



De onbewerkte inlegzool is gemaakt van EVA-materiaal en biedt de volgende Shore-hardheid = 60°

Onbewerkte inlegzool STANDARD

Schoenmaat	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen	Eenheid
35	F00021-35/L	F00021-35/R	per stuk
36	F00021-36/L	F00021-36/R	per stuk
37	F00021-37/L	F00021-37/R	per stuk
38	F00021-38/L	F00021-38/R	per stuk
39	F00021-39/L	F00021-39/R	per stuk
40	F00021-40/L	F00021-40/R	per stuk
41	F00021-41/L	F00021-41/R	per stuk
42	F00021-42/L	F00021-42/R	per stuk
43	F00021-43/L	F00021-43/R	per stuk
44	F00021-44/L	F00021-44/R	per stuk
45	F00021-45/L	F00021-45/R	per stuk
46	F00021-46/L	F00021-46/R	per stuk
47	F00021-47/L	F00021-47/R	per stuk
48	F00021-48/L	F00021-48/R	per stuk

DRESDEN STANDARD, KASSEL STANDARD, NÜRNBERG STANDARD

Onbewerkte inlegzool BREED

Schoenmaat	Art.-nr. linkerschoen	Art.-nr. rechterschoen	Eenheid
35	F00015-35/L	F00015-35/R	per stuk
36	F00015-36/L	F00015-36/R	per stuk
37	F00015-37/L	F00015-37/R	per stuk
38	F00015-38/L	F00015-38/R	per stuk
39	F00015-39/L	F00015-39/R	per stuk
40	F00015-40/L	F00015-40/R	per stuk
41	F00015-41/L	F00015-41/R	per stuk
42	F00015-42/L	F00015-42/R	per stuk
43	F00015-43/L	F00015-43/R	per stuk
44	F00015-44/L	F00015-44/R	per stuk
45	F00015-45/L	F00015-45/R	per stuk
46	F00015-46/L	F00015-46/R	per stuk
47	F00015-47/L	F00015-47/R	per stuk
48	F00015-48/L	F00015-48/R	per stuk

DRESDEN BREED, KASSEL BREED, NÜRNBERG BREED, WETZLAR



Loopzoolmateriaal, rubber

Art.-nr.	Eenheid	Afmeting [mm]
F00092	plaat	370 x 154 x 1,8



Binnenzool

Maat	Art.-nr.
S	F00011-S
M	F00011-M
L	F00011-L
XL	F00011-XL

BERLIN

Binnenzool

Maat	Art.-nr.
S	F00020-S
M	F00020-M
L	F00020-L
XL	F00020-XL

MÜNCHEN

De binnenzolen zijn gemaakt van EVA-materiaal en een bekleding van PA-schuim. De zachte bekleding is gemaakt van een geweven kunststof vezel.



De binnenzolen zijn gemaakt van EVA-materiaal. De bekleding van PA-materiaal is antimicrobieel.

Antimicrobiële binnenzool

Maat	Art.-nr.
XS	F00060-XS
S	F00060-S
M	F00060-M
L	F00060-L
XL	F00060-XL
XXL	F00060-XXL

AMSTERDAM, FREIBURG, HANNOVER,
KOPENHAGEN, LONDON, MAILAND,
REGENSBURG

Maat	Art.-nr.
XS	F00062-XS
S	F00062-S
M	F00062-M
L	F00062-L
XL	F00062-XL
XXL	F00062-XXL

KÖLN, STOCKHOLM

Antimicrobiële binnenzool

Maat	Art.-nr.
XXS	F00063-XXS
XS	F00063-XS
S	F00063-S
M	F00063-M
L	F00063-L
XL	F00063-XL
XXL	F00063-XXL

STUTTGAART, MADRID

Maat	Art.-nr.
XXS	F00064-XXS
XS	F00064-XS
S	F00064-S
M	F00064-M
L	F00064-L
XL	F00064-XL
XXL	F00064-XXL

BREMEN

Alle beschermkappen voor de voorvoet kunnen heel eenvoudig op de schoen worden aangebracht en beschermen de voet tegen natheid en kou.



Beschermkap voor de voorvoet
(met klittenband aan de buitenkant vast te maken)

Maat	Art.-nr.
XS	F09121-XS
S	F09121-S
M	F09121-M
L	F09121-L
XL	F09121-XL
XXL	F09121-XXL

STOCKHOLM



Beschermkap voor de voorvoet
(met klittenband aan de buitenkant vast te maken)

Maat	Art.-nr.
XS	F09110-XS
S	F09110-S
M	F09110-M
L	F09110-L
XL	F09110-XL
XXL	F09110-XXL

KÖLN, MÜNCHEN



Beschermkap voor de voorvoet
(met klittenband aan de binnenkant vast te maken)

Maat	Art.-nr.
XS	F09621-XS
S	F09621-S
M	F09621-M
L	F09621-L
XL	F09621-XL
XXL	F09621-XXL

AMSTERDAM, KOPENHAGEN, LONDON, MAILAND, STENDAL



Beschermkap voor de voorvoet
(met klittenband aan de binnenkant vast te maken)

Maat	Art.-nr.
XS	F09100-XS
S	F09100-S
M	F09100-M
L	F09100-L
XL	F09100-XL
XXL	F09100-XXL

KÖLN, MÜNCHEN



Beschermkap voor de voorvoet
(met klittenband aan de buitenkant vast te maken)

Schoenmaat	Art.-nr.
35-36	F09520-XXS
37-38	F09520-XS
39-40	F09520-S
41-42	F09520-M
43-44	F09520-L
45-46	F09520-XL
47-48	F09520-XXL

KASSEL STANDARD, KASSEL BREED



Beschermkap voor de voorvoet
(met klittenband aan de buitenkant vast te maken)

Schoenmaat	Art.-nr.
35-36	F09580-XXS
37-38	F09580-XS
39-40	F09580-S
41-42	F09580-M
43-44	F09580-L
45-46	F09580-XL
47-48	F09580-XXL
49-50	F09580-XXXL

AUGSBURG STANDARD, AUGSBURG BREED



Beschermkap voor de voorvoet
(met klittenband aan de buitenkant vast te maken)

Maat	Art.-nr.
S	F09400-S
M	F09400-M
L	F09400-L
XL	F09400-XL

BERLIN



Beschermkap voor de voorvoet
(met klittenband aan de buitenkant vast te maken)

Maat	Art.-nr.
XS	F09620-XS
S	F09620-S
M	F09620-M
L	F09620-L
XL	F09620-XL
XXL	F09620-XXL

HANNOVER, FREIBURG

Alle beschermkappen voor de achtervoet kunnen heel eenvoudig op de schoen worden aangebracht en beschermen de voet tegen natheid en kou.



Beschermkap voor de achtervoet (met klittenband aan de buitenkant vast te maken)

Maat	Art.-nr.
S	F09301-S
M	F09301-M
L	F09301-L
XL	F09301-XL

MÜNCHEN



Beschermkap voor de achtervoet (met klittenband aan de buitenkant vast te maken)

Schoenmaat	Art.-nr.
35-36	F09543-XXS
37-38	F09543-XS
39-40	F09543-S
41-42	F09543-M
43-44	F09543-L
45-46	F09543-XL
47-48	F09543-XXL

WETZLAR



inclusief montageset

Beschermbeugels

Maat	Art.-nr.
S	F01000-Z5
M	F01000-Z6
L	F01000-Z7
XL	F01000-Z8

BERLIN



Klittenband

Maat	Art.-nr.	Afmetingen
XS – XXL	F00002-S	50 x 200 mm



Lang stuk klittenband

Maat	Art.-nr.	Afmetingen
XXS – XXL	F00001-L	25 x 650 mm

HMV-nummers

De hulpmiddelcatalogus van de wettelijke ziektekostenverzekering in Duitsland bevat een lijst met hulpmiddelen waarvan de kosten volgens de Duitse richtlijn inzake hulpmiddelen van de 'Gemeinsamer Bundesausschuss' door de Duitse wettelijke ziektekostenverzekering worden vergoed.

Omschrijving	Art.-nr.	HMV-nr.	Pagina
Orthopedische schoen AMSTERDAM	TS6100-*	31.03.03.4037	33
Orthopedische schoen AUGSBURG BREED	TS5481-*	31.03.03.4135	19
Orthopedische schoen AUGSBURG STANDARD	TS5381-*	31.03.03.4116	19
Orthopedische schoen BREMEN	TS1151-*	31.03.03.4033	30
Orthopedische schoen ERFURT BREED	TS5410-*	31.03.03.4030	17
Orthopedische schoen ERFURT STANDARD	TS5310-*	31.03.03.4029	17
Orthopedische schoen FLENSBURG BREED	TS5911-*	31.03.03.4073	15
Orthopedische schoen FLENSBURG STANDARD	TS5311-*	31.03.03.4073	15
Orthopedische schoen FREIBURG	TS6101-*	31.03.03.4015	34
Voorvoet ontlastende schoen HANNOVER	FO1101-*	31.03.03.5019	38
Orthopedische schoen HEIDELBERG	TS4552-*	31.03.03.4051	26
Voorvoet ontlastende schoen KÖLN	FO1121-*	31.03.03.5020	40
Orthopedische schoen KONSTANZ	TH4562-*	31.03.03.4137	24
Orthopedische schoen LEIPZIG	TS5512-*	31.03.03.4040	12
Orthopedische schoen MADRID	TS1000-*	31.03.03.4141	31
Voorvoet ontlastende schoen MAILAND	FO1100-*	31.03.03.5043	39
Achterschoen ontlastende schoen MÜNCHEN	FO2121-*	31.03.03.5021	46
Orthopedische schoen REGENSBURG	TS6141-*	31.03.03.4035	35
Voorvoet ontlastende schoen STOCKHOLM	FO1120-*	31.03.03.5050	41
Orthopedische schoen STUTTGART	TS1111-*	31.03.03.4031	32

*Op de betreffende productpagina's vindt u de overeenkomende artikelnummers en schoenmaten.



KT2800-DE-2025-05

FIOR & GENTZ

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Duitsland)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 921 95659554

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ