


NEURO VARIO-CLASSIC



	Dorsalanschlag	Plantaranschlag
Hauptfunktion	 statisch	 ohne
Anpassungsmöglichkeiten	einfelbar, justierbar	
Weitere Funktionen	ohne durch Einfeilen	
Das NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenk durch Austauschen der Deckplatte gegen eine NEURO VARIO-SPRING Funktionseinheit.		
Das NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer für das NEURO VARIO-SPRING einsetzbar.		

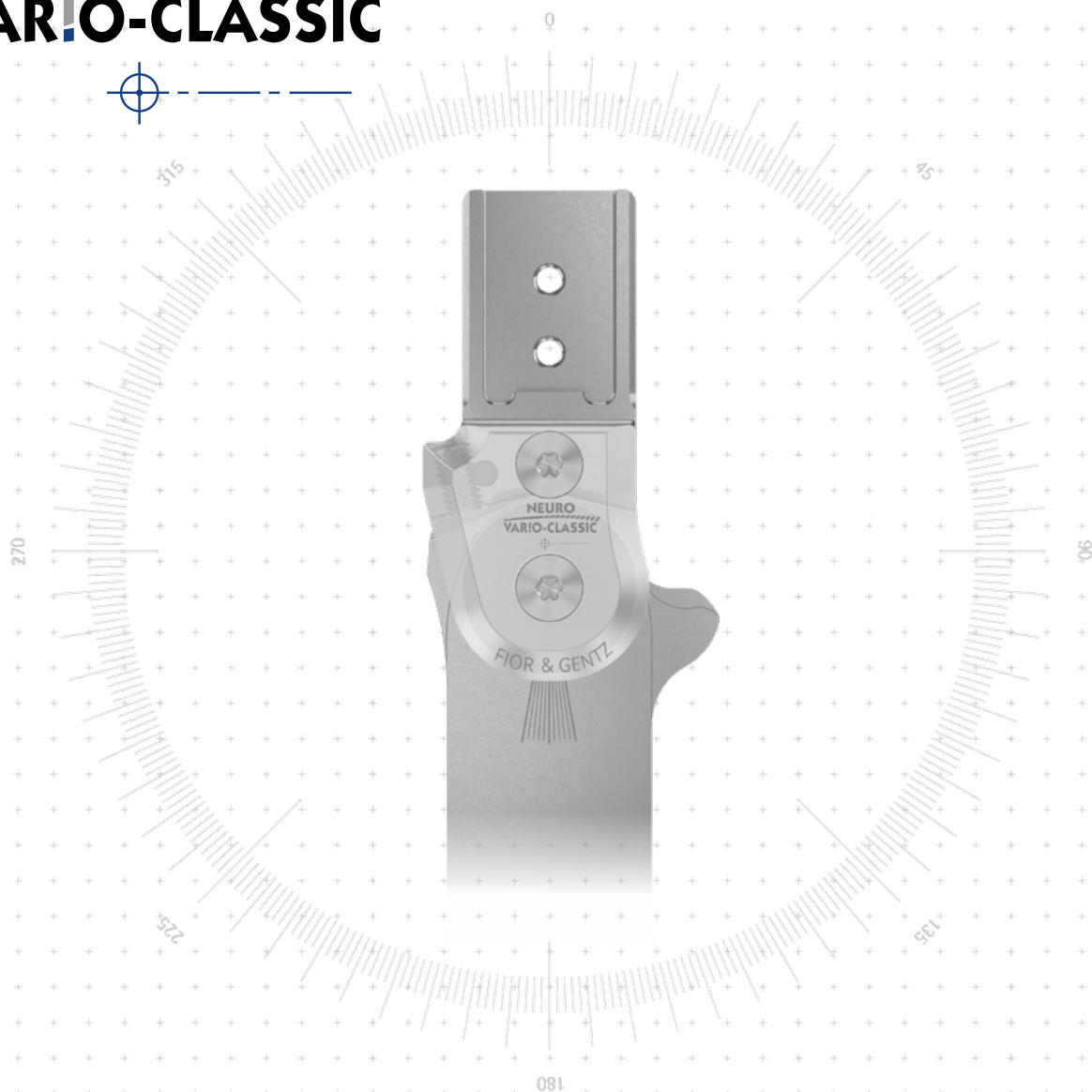

NEURO VARIO-CLASSIC

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRING

NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-CLASSIC



14 mm



16 mm




20 mm

Gelenkmaße [mm]

Maß	Bezeichnung	Systembreite a		
		14 mm	16 mm	20 mm
b	Gelenkkopfbreite	25	30	34
c	Gelenkhöhe	63	69	74
	Gelenkdicke	11	11,5	12,5

Gelenkgewichte [g]

Material	ME	Systembreite		
		14 mm	16 mm	20 mm
Stahl	Stück	47	69	96
Titan	Stück	31	47	63

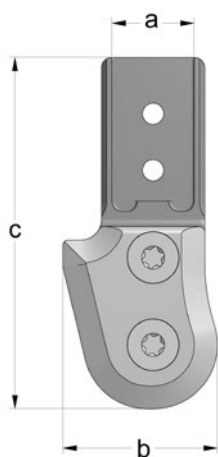

Das NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:

Gewindesicherungsstift
 Orthesengelenkfett, 3 g
 Montage-/Gießdummy

- ➔ Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
- ➔ Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite B10.7.
- ➔ Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite I1.

B10.3



gerade
Abb. 1



nach innen gekröpft
Abb. 2



nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)

Material	Beinseite	ME	Artikelnummer für Systembreite		
			14 mm	16 mm	20 mm
Stahl	links lateral oder rechts medial	Stück	SH2202-L/ST	SH2203-L/ST	SH2205-L/ST
	links medial oder rechts lateral	Stück	SH2202-R/ST	SH2203-R/ST	SH2205-R/ST
Titan	links lateral oder rechts medial	Stück	SH2202-L/TI	SH2203-L/TI	SH2205-L/TI
	links medial oder rechts lateral	Stück	SH2202-R/TI	SH2203-R/TI	SH2205-R/TI


nach innen gekröpft (Abb. 2)

Material	Beinseite	ME	Artikelnummer für Systembreite		
			14 mm	16 mm	20 mm
Stahl	links lateral oder rechts medial	Stück	SH2222-L/ST	SH2223-L/ST	SH2225-L/ST
	links medial oder rechts lateral	Stück	SH2222-R/ST	SH2223-R/ST	SH2225-R/ST
Titan	links lateral oder rechts medial	Stück	SH2222-L/TI	SH2223-L/TI	SH2225-L/TI
	links medial oder rechts lateral	Stück	SH2222-R/TI	SH2223-R/TI	SH2225-R/TI

nach außen gekröpft (Abb. 3)

Material	Beinseite	ME	Artikelnummer für Systembreite		
			14 mm	16 mm	20 mm
Stahl	links lateral oder rechts medial	Stück	SH2242-L/ST	SH2243-L/ST	SH2245-L/ST
	links medial oder rechts lateral	Stück	SH2242-R/ST	SH2243-R/ST	SH2245-R/ST
Titan	links lateral oder rechts medial	Stück	SH2242-L/TI	SH2243-L/TI	SH2245-L/TI
	links medial oder rechts lateral	Stück	SH2242-R/TI	SH2243-R/TI	SH2245-R/TI

Ersatzteile

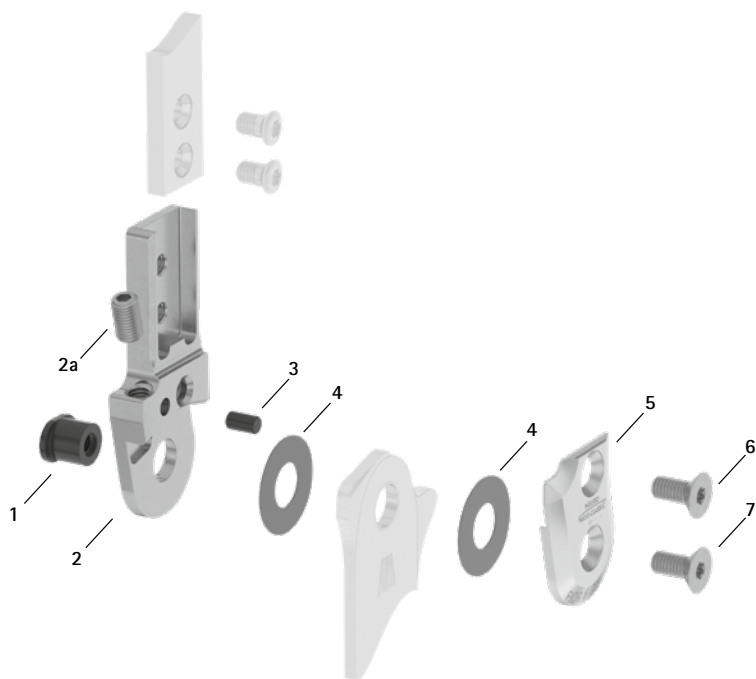


Ersatzteile

Pos.	Artikelnummer für Systembreite			Bezeichnung
	14 mm	16 mm	20 mm	
1	SB8559-L0620	SB9669-L0760	SB1069-L0810	Splintbolzen
2	SF0412-L/ST	SF0413-L/ST	SF0415-L/ST	Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl (mit Justierschraube)
2	SF0412-R/ST	SF0413-R/ST	SF0415-R/ST	Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl (mit Justierschraube)
2	SF0412-L/TI	SF0413-L/TI	SF0415-L/TI	Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan (mit Justierschraube)
2	SF0412-R/TI	SF0413-R/TI	SF0415-R/TI	Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan (mit Justierschraube)
2	SF0432-L/ST	SF0433-L/ST	SF0435-L/ST	Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)
2	SF0432-R/ST	SF0433-R/ST	SF0435-R/ST	Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)
2	SF0432-L/TI	SF0433-L/TI	SF0435-L/TI	Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)
2	SF0432-R/TI	SF0433-R/TI	SF0435-R/TI	Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)
2	SF0432-8L/ST	SF0433-8L/ST	SF0435-8L/ST	Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)
2	SF0432-8R/ST	SF0433-8R/ST	SF0435-8R/ST	Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)
2	SF0432-8L/TI	SF0433-8L/TI	SF0435-8L/TI	Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)
2	SF0432-8R/TI	SF0433-8R/TI	SF0435-8R/TI	Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)
2a	SC9605-L08ST	SC9606-L10ST	SC9606-L10ST	Justierschraube
3	GS4007	GS4007	GS4007	Gewindesicherungsstift
4	GS2009-*	GS2210-*	GS2611-*	Gleitscheibe*
5	SH0262-L/AL	SH0263-L/AL	SH0265-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial
5	SH0262-R/AL	SH0263-R/AL	SH0265-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral
6	SC1405-L10	SC1405-L11	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund
7	SC1405-L10	SC1405-L11	SC1406-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

* Gleitscheiben

Artikelnummer für Systembreite		
14 mm	16 mm	20 mm
Ø = 20 mm	Ø = 22 mm	Ø = 26 mm
GS2009-040	GS2210-040	GS2611-040
GS2009-045	GS2210-045	GS2611-045
GS2009-050	GS2210-050	GS2611-050
GS2009-055	GS2210-055	GS2611-055
GS2009-060	GS2210-060	GS2611-060

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS2009-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

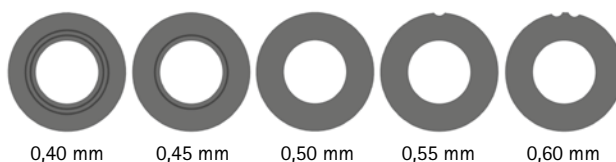

➔ Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite B10.7.

➔ Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite I1.



Niet-Fußbügel



Einguss-/Prepreg-Fußbügel



Tiefzieh-Fußbügel



Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel

Maß [mm]	Systembreite		
	14 mm	16 mm	20 mm
Dicke	2,5	3,0	3,0
Halsbreite	23,2	26,6	30,8
Bohrungsdurchmesser	8,5	9,6	10,5

gekröpft

Bezeichnung	Beinseite	ME	Artikelnummer und Maße für Systembreite		
			14 mm	16 mm	20 mm
Niet-Fußbügel	links lateral oder rechts medial	Stück	FB4082-L/ST4	FB4093-L/ST4	FB4095-L/ST5
	links medial oder rechts lateral		FB4082-R/ST4	FB4093-R/ST4	FB4095-R/ST5
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			124	144	164
Gewicht [g]			67	106	134
Einguss-/Prepreg-Fußbügel	links lateral oder rechts medial	Stück	FB4182-L/ST1	FB4193-L/ST1	FB4195-L/ST1
	links medial oder rechts lateral		FB4182-R/ST1	FB4193-R/ST1	FB4195-R/ST1
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			50	58	68
Gewicht [g]			32	52	68
Tiefzieh-Fußbügel	links lateral oder rechts medial	Stück	FB4282-L/ST2	FB4293-L/ST2	FB4295-L/ST3
	links medial oder rechts lateral		FB4282-R/ST2	FB4293-R/ST2	FB4295-R/ST3
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			61	67	73
Gewicht [g]			32	50	61



Niet-Fußbügel



Einguss-/Prepreg-Fußbügel



Tiefzieh-Fußbügel

gerade

Bezeichnung	ME	Artikelnummer und Maße für Systembreite		
		14 mm	16 mm	20 mm
Niet-Fußbügel	Stück	FB4082-ST/4	FB4093-ST/4	FB4095-ST/5
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		125	145	165
Gewicht [g]		67	106	134
Einguss-/Prepreg-Fußbügel	Stück	FB4182-ST/1	FB4193-ST/1	FB4195-ST/1
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		51	59	69
Gewicht [g]		32	52	68
Tiefzieh-Fußbügel	Stück	FB4282-ST/2	FB4293-ST/2	FB4295-ST/3
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		62	68	74
Gewicht [g]		32	50	61

Ersatzteile Systemfußbügel

Pos.	Artikelnummer für Systembreite			Bezeichnung
	14 mm	16 mm	20 mm	
1	BR1009-L025	BR1110-L030	BR1211-L030	Gleitbuchse

→ Alle Systemfußbügel des NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung**Niet-Fußbügel:**



→ Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:

→ Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminert.

Tiefzieh-Fußbügel:

→ Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann auch einlaminert werden.

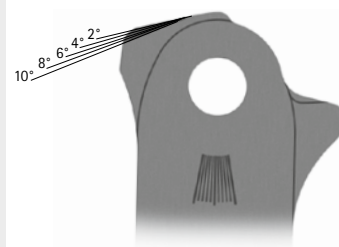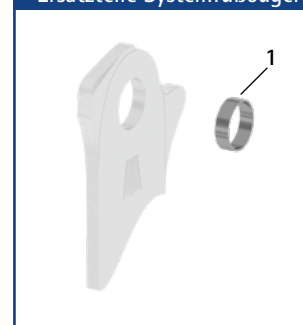Ersatzteile Systemfußbügel

→ Im Kopfbereich ist jeder Systemfußbügel mit Hilfslinien versehen, die ein präzises Einfeilen in Dorsalextension erleichtern.

→ Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel mit Hilfslinien versehen, mit denen man den Gelenkwinkel ablesen kann.