

P1

Ortesi dinamica
in carbonio



Indicazioni

- Problemi di dorsiflessione

Controindicazioni


- Spasticità di grado medio-elevato

Vantaggi per gli utilizzatori

- Un'ortesi estremamente dinamica e funzionale
- Mantiene il piede in posizione funzionale a 90° ed evita quindi i problemi causati da deficienza peroneale
- Soddisfa tutte le esigenze di confort
- Idonea anche per sportivi
- La struttura sottile assicura un aspetto discreto, all'interno di una calzatura normale




Massima adattabilità
sul paziente

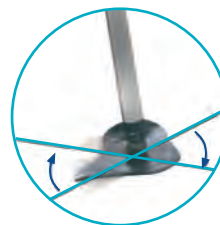

Eccezionale modulo
elastico nell'avampiede
in caso di irregolarità del
piano d'appoggio



Termoformabile

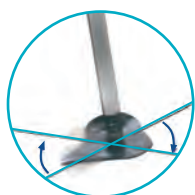

Una soletta di carbonio molto sottile e parzialmente flessibile fornisce un'ottima adattabilità al piano d'appoggio.



Il disegno dell'ortesi permette una piegatura precisa nell'area del tallone della molla dorsale.



La molla dorsale è costituita di acciaio ad alta trazione, con prefori per il fissaggio della staffa al polpaccio.



Staffa al polpaccio che sostiene l'ortesi sulla gamba.



Imbottitura adattabile della soletta in carbonio.



Velcri con imbottitura morbida e fibbia di sicurezza, per il miglior fissaggio dell'ortesi alla gamba.

Kit P1 ortesi dinamica in carbonio

Articolo nr.	Misura	Misura della calzatura	Gamba
P01100-S/L	S	35 - 37	sinistra
P01100-S/R	S	35 - 37	destra
P01100-M/L	M	38 - 40	sinistra
P01100-M/R	M	38 - 40	destra
P01100-L/L	L	41 - 43	sinistra
P01100-L/R	L	41 - 43	destra
P01100-XL/L	XL	44 - 46	sinistra
P01100-XL/R	XL	44 - 46	destra

Fornitura: 1 x P1 ortesi in carbonio con staffa al polpaccio, imbottitura della soletta, imbottitura termoformabile della molla e set di velcri

P1 ortesi in carbonio senza accessori Per la produzione di ortesi personalizzate

Articolo nr.	Misura	Misura della calzatura	Gamba
P00110-S/L	S	35 - 37	sinistra
P00110-S/R	S	35 - 37	destra
P00110-M/L	M	38 - 40	sinistra
P00110-M/R	M	38 - 40	destra
P00110-L/L	L	41 - 43	sinistra
P00110-L/R	L	41 - 43	destra
P00110-XL/L	XL	44 - 46	sinistra
P00110-XL/R	XL	44 - 46	destra

P1 staffa di carbonio al polpaccio

Articolo nr.	Misura	Circonf. del polpaccio* [cm]	Colore
P00101-M	S/M	29 - 36	nero
P00101-XL	L/XL	37 - 44	nero

* misurato al punto superiore del polpaccio

P1 imbottitura della soletta

Articolo nr.	Descrizione	Colore	Misura della calzatura
P00300-L	imbottitura della soletta	nero	35 - 46
P00300-R	imbottitura della soletta	nero	35 - 46

Set di velcri per P1

Articolo nr.	Descrizione	Colore
KV2004-L450	velcro per P1 - misura S e M	nero
KV2004-L500	velcro per P1 - misura L	nero
KV2004-L550	velcro per P1 - misura XL	nero