

## NEURO MATIC –

Aseguramiento de la fase de apoyo mecánico



## NEURO MATIC – Aseguramiento de la fase de apoyo mecánico



### Para ortesis a medida

Estar de pie y caminar con la mayor normalidad será posible gracias al aseguramiento de la fase de apoyo mecánico.

### Seguridad en cada situación

La articulación ortésica asegura la rodilla bajo carga en la fase de apoyo a partir de la respuesta a la carga y la libera en la fase de balanceo.


### 3 posibilidades de ajuste mediante la palanca de mando

- Auto – movimiento libre/bloqueo automático, mecánico
- Free – ajuste para situaciones en las que la articulación debe estar de movimiento libre permanente, p. ej., al ir en bicicleta
- Lock – bloqueo permanente, mecánico

### Vídeo de función



Escanear código QR para más información

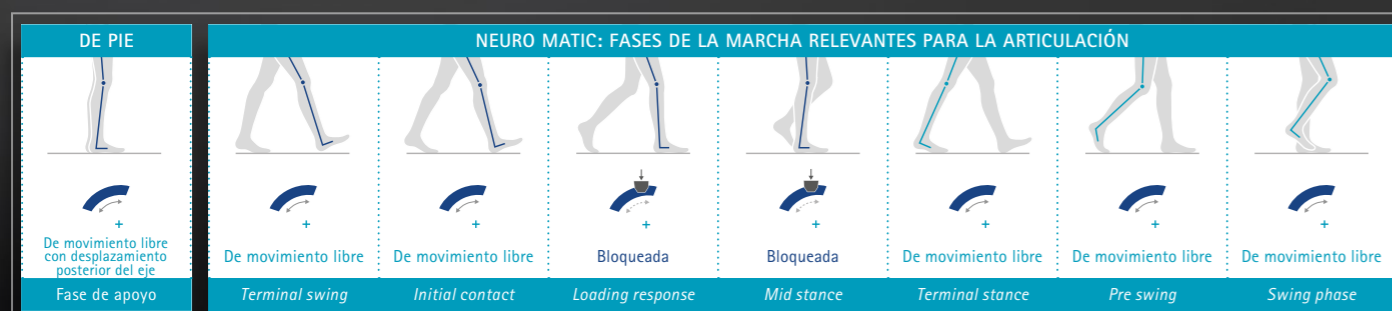

## NEURO MATIC – Control de articulación mediante una conexión por cable a la articulación de tobillo

El movimiento en la articulación de tobillo resulta en un bloqueo y desbloqueo de la articulación de rodilla **NEURO MATIC**.



# NEURO MATIC



¿Quiere producir una ortesis con articulación de rodilla de sistema **NEURO MATIC** para su paciente?

Utilice el configurador de ortesis para escoger personalmente los componentes para una ortesis con la **NEURO MATIC**. El configurador de ortesis calcula, a partir de los datos de paciente y tomando en consideración la capacidad de carga, los componentes de sistema apropiados para su paciente.



## Configurador de ortesis

[www.orthosis-configurator.com/es](http://www.orthosis-configurator.com/es)

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädiotechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Alemania)

+49 4131 24445-0  
+49 921 95659554

info@fior-gentz.de  
www.fior-gentz.com

**FIOR & GENTZ**

PR0217-ES-2023-09