

NEURO MATIC – Mechanische standfasevergrendeling



NEURO MATIC – Mechanische standfasevergrendeling



Voor op maat gemaakte ortheses

Staan en normaal lopen wordt dankzij mechanische standfasevergrendeling weer mogelijk.

Zekerheid in elke situatie

Het orthesegewricht zekert bij belasting in de standfase de knie vanaf de overname van de belasting en geeft de knie in de zwaai fase weer vrij.


3 instellingsmogelijkheden via de borgingshefboom

- Auto – automatisch vrij beweegbaar/vergrendeld, mechanisch
- Free – instelling voor situaties waarin het gewricht permanent vrij beweegbaar moet zijn. Bijv. fietsen.
- Lock – permanent vergrendeld, mechanisch

Functievideo



Scan QR-code voor meer informatie

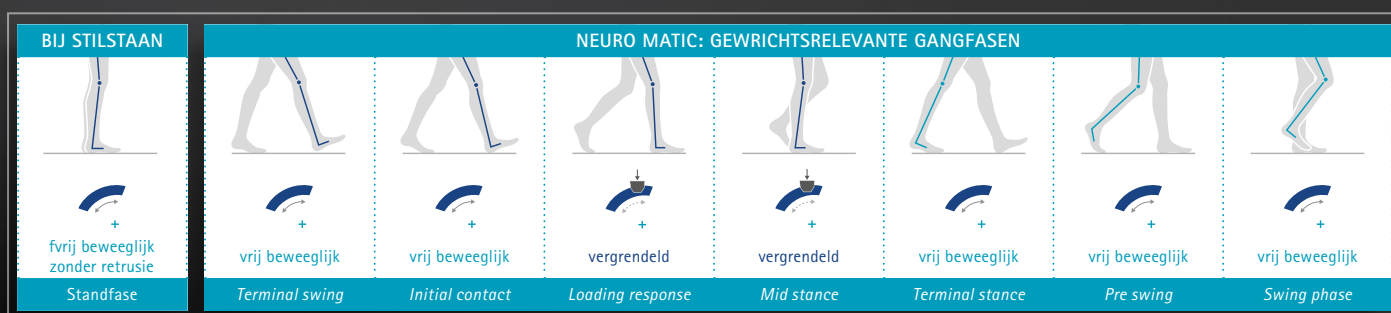



NEURO MATIC – Gewrichtsaansturing door de kabelverbinding met het systeemknelgewricht

De beweging in het systeemknel-
gewricht leidt tot vergrendeling en
ontgrendeling van het systemknie-
gewricht **NEURO MATIC**.





U wilt voor uw patiënt(e) een orthese met een systeemkniegewricht **NEURO MATIC** vervaardigen?

Gebruik de ortheseconfigurator om zelfstandig de componenten voor een orthese met de **NEURO MATIC** samen te stellen. De ortheseconfigurator bepaalt met behulp van de patiëntgegevens en met inachtneming van de belastbaarheid de systeemcomponenten die voor uw patiënt(e) geschikt zijn.



**Orthese-
configurator**

www.orthesen-konfigurator.de/nl

PR0217-NL-2023-09

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Duitsland)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM